


# ragmask v2.3b2

ragmask.com


## 1. Wydrukuj tylko pierwszą stronę.

Nie potrzebujesz wszystkich stron, oszczędzaj papier i drukarkę.

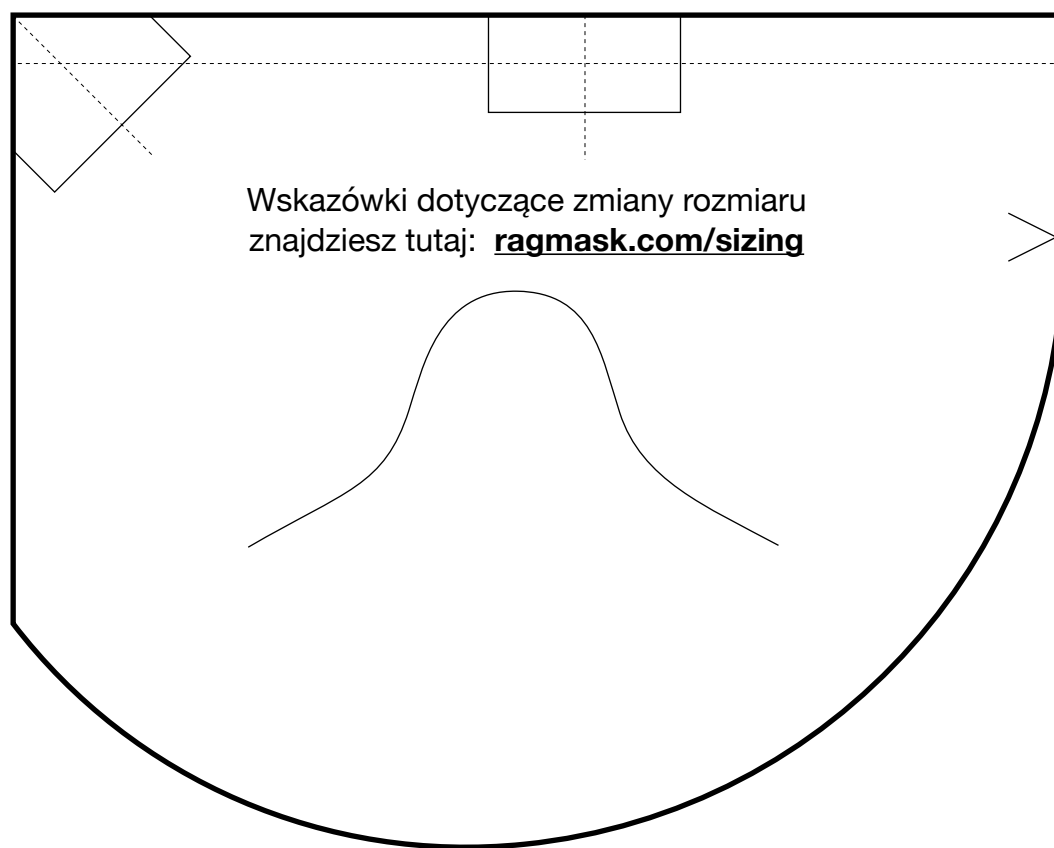

## 2. Sprawdź skalę.

Upewnij się, że szablon dla maseczki został wydrukowany w odpowiednim rozmiarze.  
Prawdziwa linijka powinna pasować do linijki wydrukowanej poniżej.

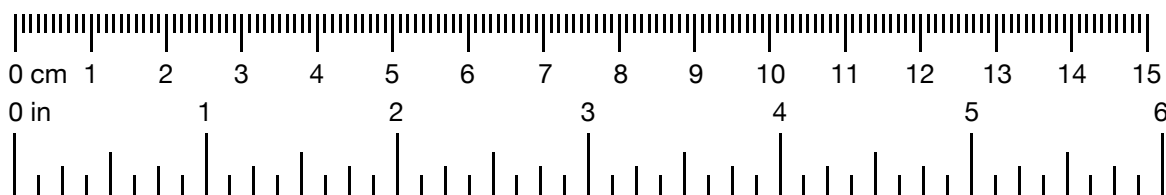


### 3. Wytnij materiały.

#### **Tkanina 28x28cm (na jedną maskę)**

Najlepsza jest tkanina bawełniana o szczelnym splocie: poszukaj starych poszewek na poduszki, prześcieradeł, ręczników kuchennych. Im gęstszy wątek tkaniny – tym lepiej. Więcej o doborze materiałów na stronie: [ragmask.com/materials](https://ragmask.com/materials)

#### **Tasiemka 160 cm na troczki (4 sztuki po 40 cm)**

Tasiemka z pasmanterii jest najlepsza, ale jeśli nie masz do niej dostępu, po prostu wytnij paski szerokości 2-2,5 cm z tej samej tkaniny, której używasz do maski.

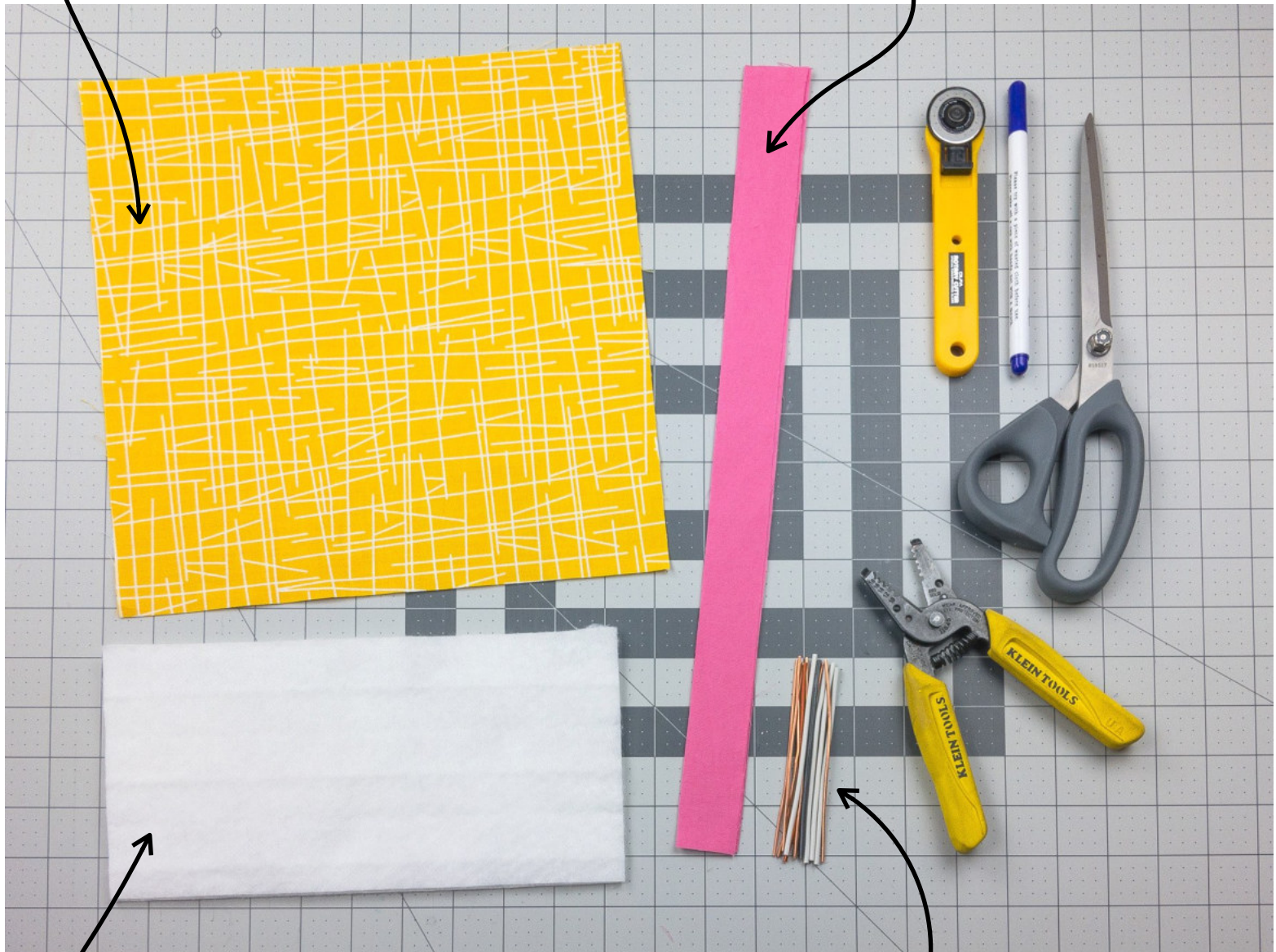

#### **Drut metalowy 10 cm, najlepiej miedziany (1 sztuka na maskę).**


Inne rozwiązania dopasowania maski do nosa znajdziesz tutaj: [ragmask.com/materials](https://ragmask.com/materials)

#### **Filtr 27 x 13,5 cm (opcjonalnie), 1 sztuka na maskę**

Dobry filtr można zrobić wycinając odpowiedni kawałek z jednorazowego worka do odkurzacza o oznaczeniu HEPA, lub z innej włókniny.



4. Połóż filtr na tkaninie i  
złóż ją na pół.

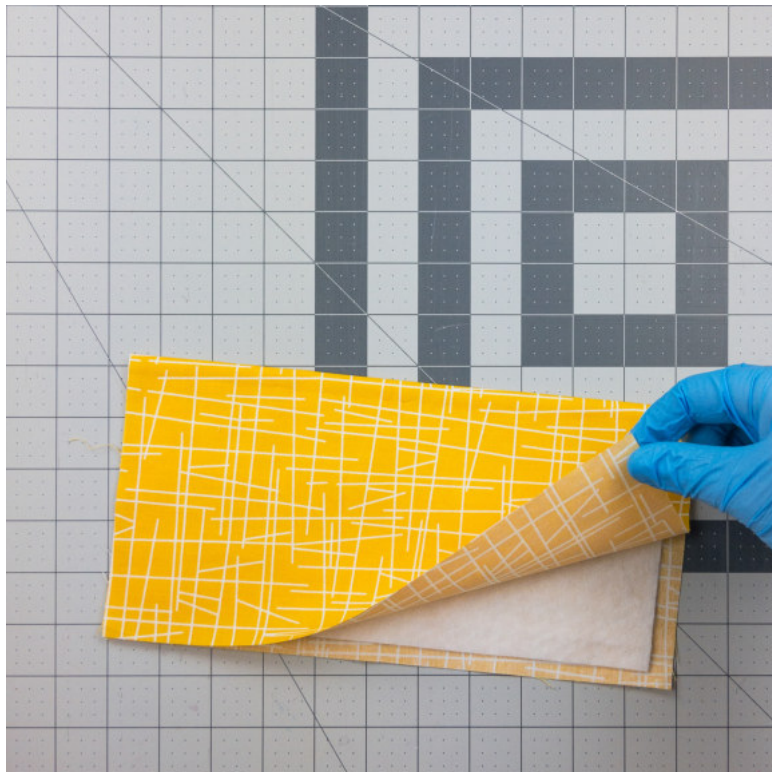

5. Zszyj tkaninę z trzech stron jak na rysunku.






6. Złóż na pół..



7. Oznacz kształt maseczki używając wydrukowanego szablonu ze strony 1.

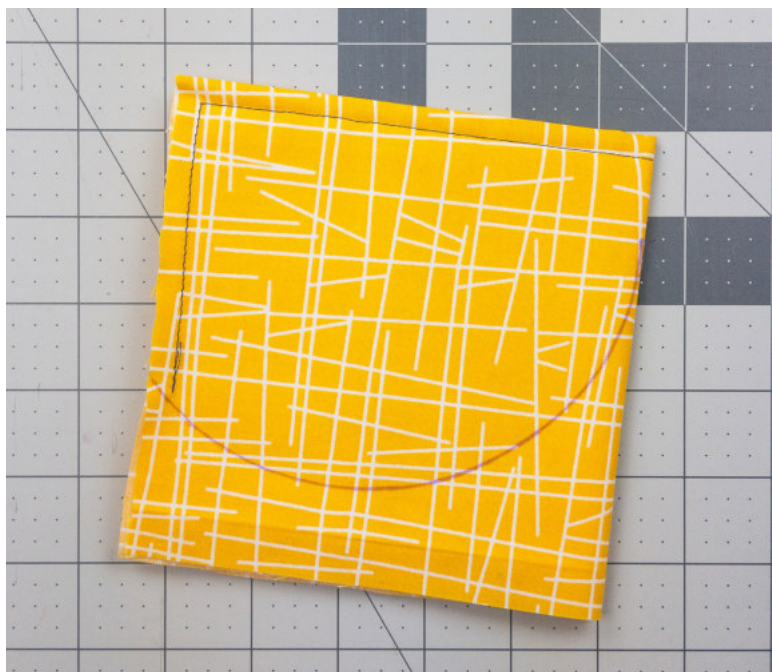

8. Zszyj wzdłuż zaznaczonej linii.



9. Odetnij nadmiar tkaniny około 0,5 cm od linii szwu.






10. Odwróć na lewą stronę.



11. Oznacz za pomocą szabló lokalizację pasek.

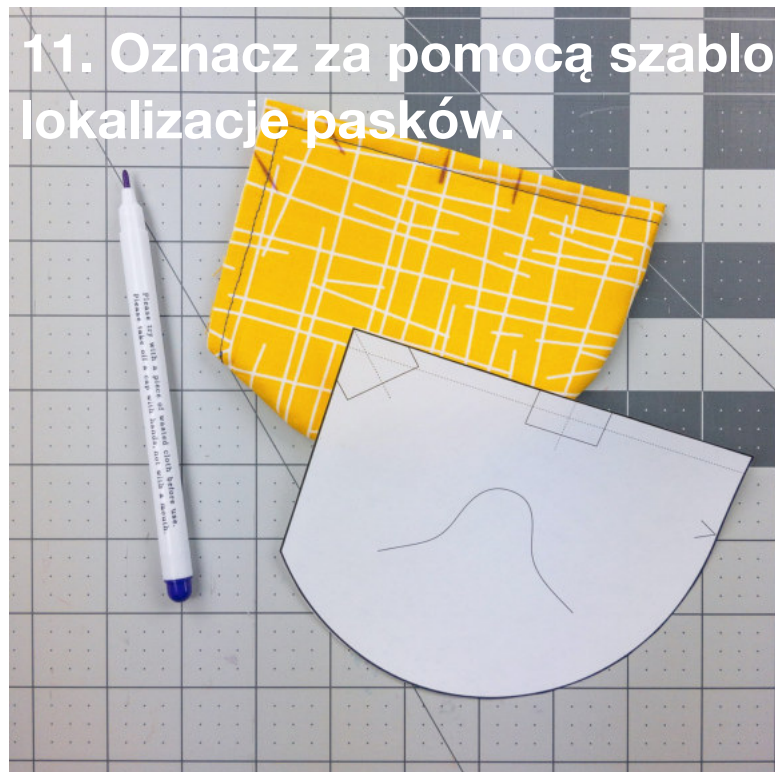

12. Przyszyj troczki do zewnętrznej strony maski.


*Można też przyszyć troczki pierwszym szwem, ale trzeba później wzmocnić miejsce przyszycia dodatkowymi szwami.*







**13. Włóż drut w kieszonkę utworzoną przez pierwszy szew tak aby znalazł się na środku nad nosową częścią maski.**

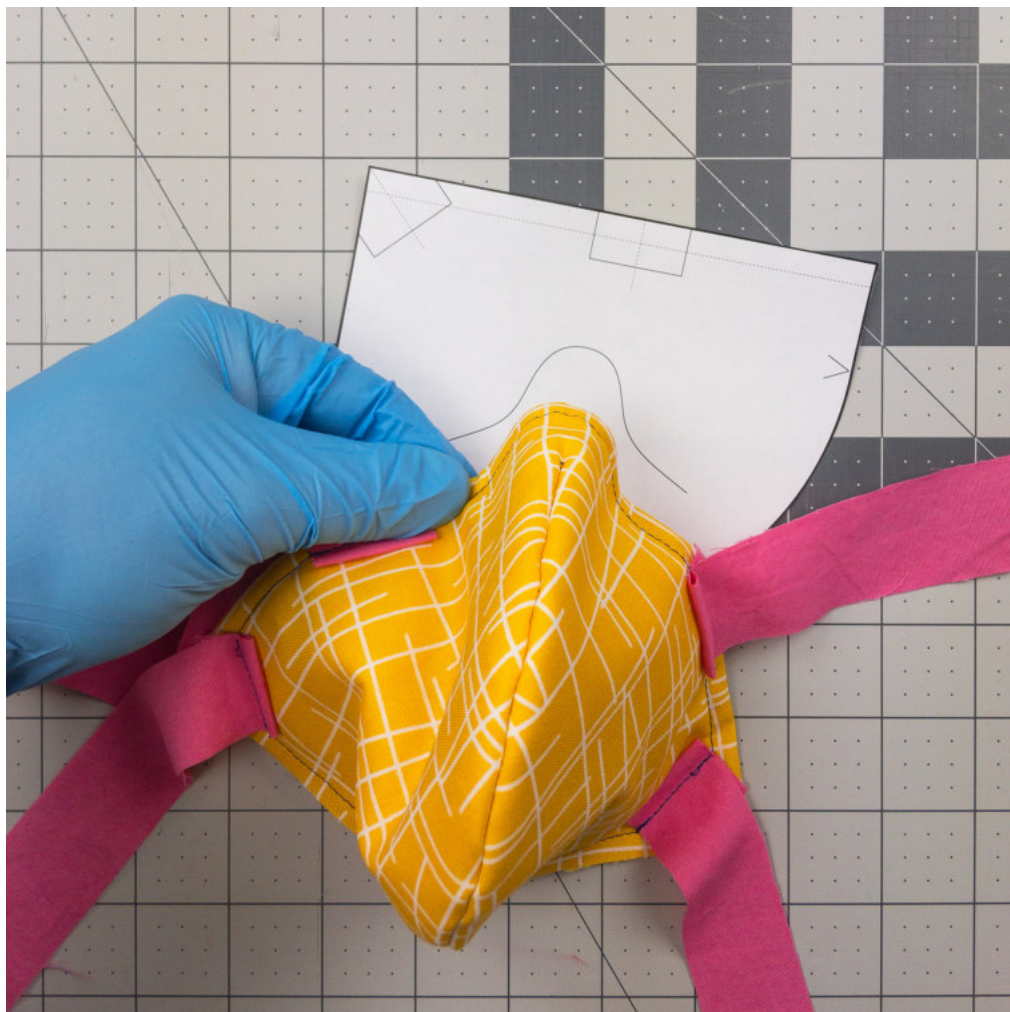

**14. Dopasuj drut do kształtu nosa.**

# Używanie i czyszczenie

## Dopasowanie

Dopasuj kształt maski wokół nosa odpowiednio wyginając drut. Zawiąż troczki za głowę: górne - nad uszami, a dolne - pod uszami. Założonej maski nie należy poprawiać, aby uniknąć zanieczyszczenia rąk osiadającymi na masce cząsteczkami. Dlatego szczególnie przy pierwszym założeniu poświęć trochę czasu na korektę. Maską powinna szczelnie przylegać do twarzy, ale nie uciskać.

W czasie noszenia minimalizuj kontakt z tkaniną wewnętrzną i zewnętrzną maski, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia. Zdejmując maskę chwyć za troczki, rozwiąż je i zdejmij trzymając za troczek. Jeżeli zawiążesz troczki na kokardkę będzie je łatwiej rozwiązać.

## Czyszczenie

Maskę należy wyprać po każdym użyciu. Pielęgnacja i czyszczenie będzie zależało od tego, z jakiego materiału jest uszyta maska oraz od rodzaju filtra. (Aby maseczka nie skurczyła się po praniu należy materiał przed uszyciem maski wstępnie wyprać i wysuszyć.) Najlepiej przed praniem usunąć drut z maski.

Więcej informacji o poprawie trwałości i estetyki maski można znaleźć tutaj: [ragmask.com/pro](https://ragmask.com/pro)





# Pro Tip: Fast Straps

More tips at [ragmask.com/pro](http://ragmask.com/pro)

**1. Print another copy of Page 1, trim template. After making first fold, mark centers of straps.**



**2. Sew straps on as part of the first stitch. (Backstitch over straps for added durability).**



**3. Fold in half (straps on the inside of the fold), mark, sew & cut as before.**

