


ragmask v2.3b2

ragmask.com


1. Yalnızca bu sayfayı yazdır.

Diğer sayfalara ihtiyacınız yok, kağıdınızı sarf etmeyin.

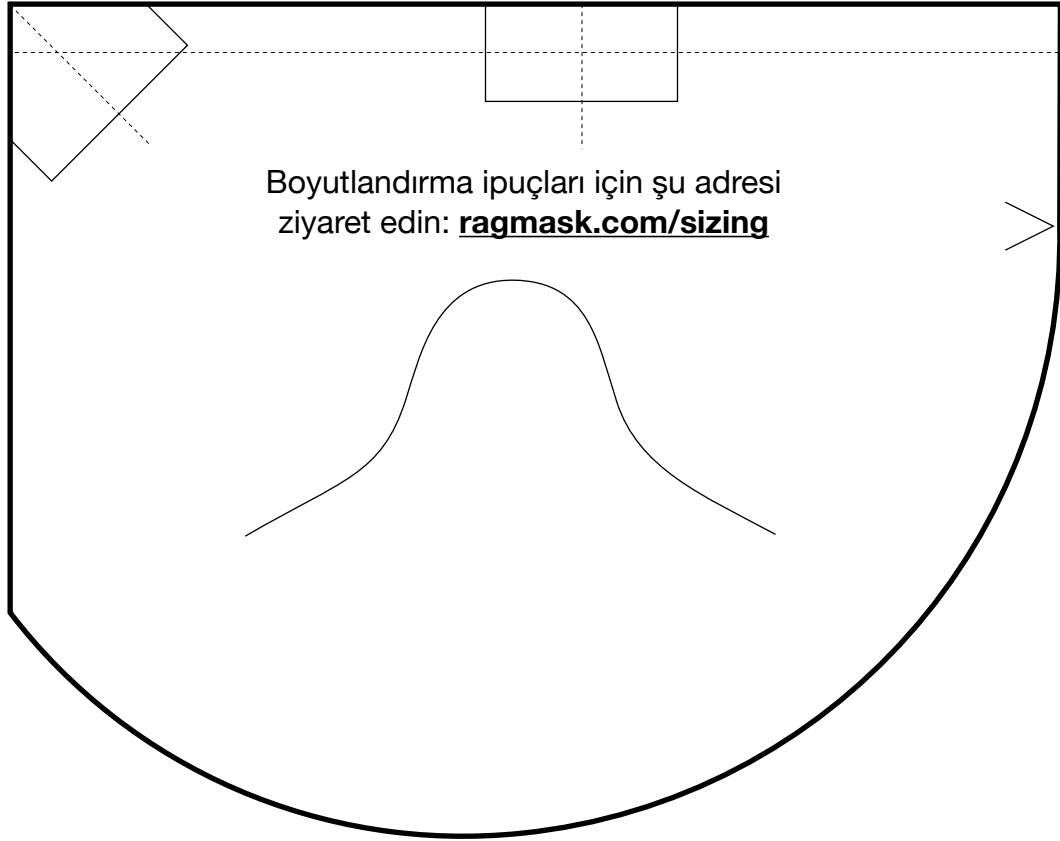

2. Ölçeği kontrol et.

Doğru boyutta yazdırıldığından emin olun. Gerçek bir cetvel aşağıdaki cetvelle eşleşmelidir.

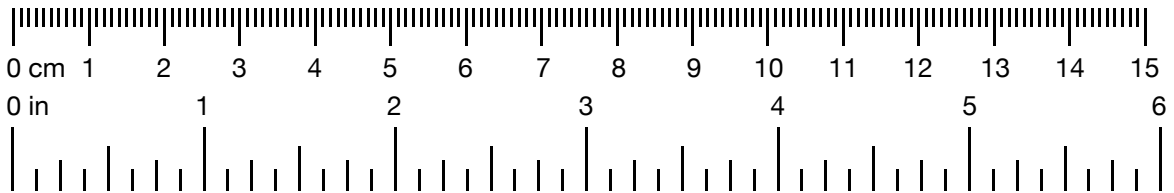


3. Kesilmiş malzemeler.

28x28cm (11"x11") kumaş, maske başına 1 adet

Sıkı dokunmuş pamuk en iyisidir, eski yastık kılıflarını, çarşafları veya bulaşık havlularını arayın; iplik sayısı ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. Malzeme bilgileri ve diğer ipuçları için şu adresi ziyaret edin: ragmask.com/materials

40cm (16") kayışlar için şeritler, maske başına 4 adet

Gabardin bant veya başka bir yıpranmayan malzeme en iyisidir, ancak eğer yoksa, maske için kullandığınız aynı kumaştan 1 "(2.5cm) şeritler kesin

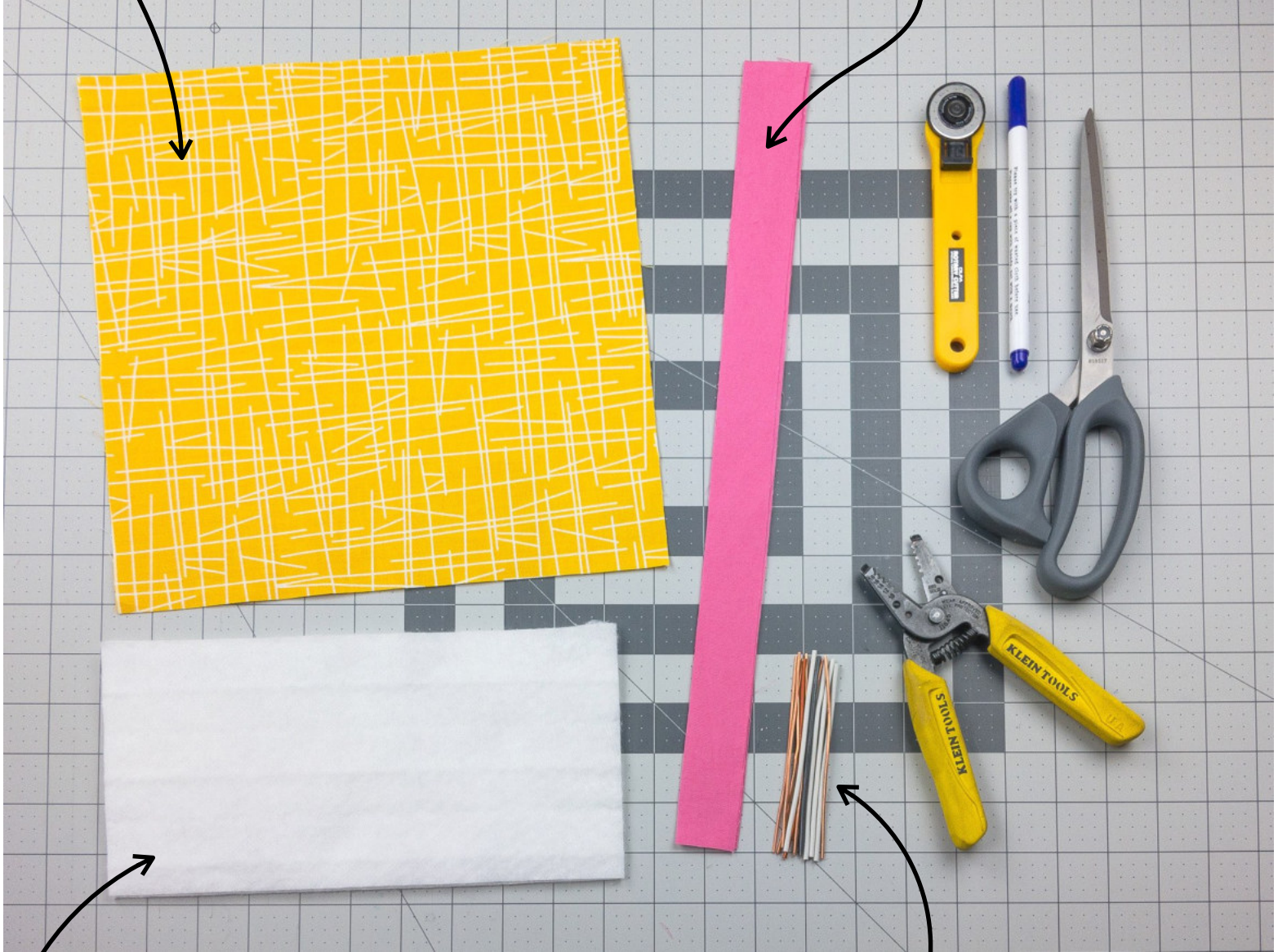


10cm (4") metal tel, maske başına 1 parça, 14ga bakır kullanımı tavsiye edilir.

Burun teli için farklı seçenekler için, şu adresi ziyaret edin: ragmask.com/materials

26x13cm (10"x5") filtre (isteğe bağlı), maske başına 1 adet

Birçok kişi filtresiz olarak maske yapabilir! Tek başına kumaş etkili olabilir. İnce yorgan vatkası maske şeklini vermek için iyi bir alternatiftir.



4. Kumaşı filtrenin üzerine
katlayın.

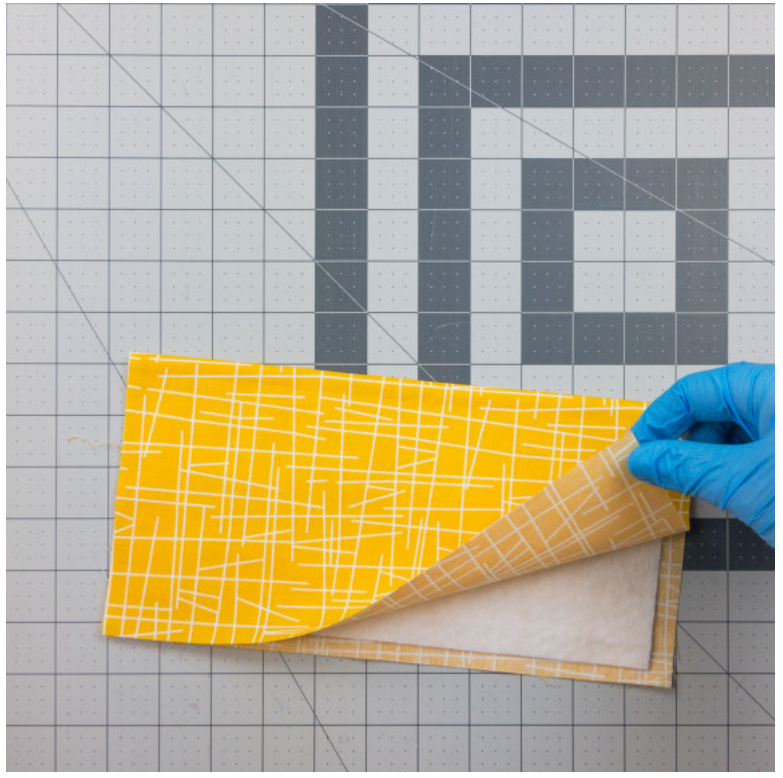

5. 3 tarafi dikiş.
0.5cm (3/16") dikiş payı, hızlı > güzel.



6. Katlayın.

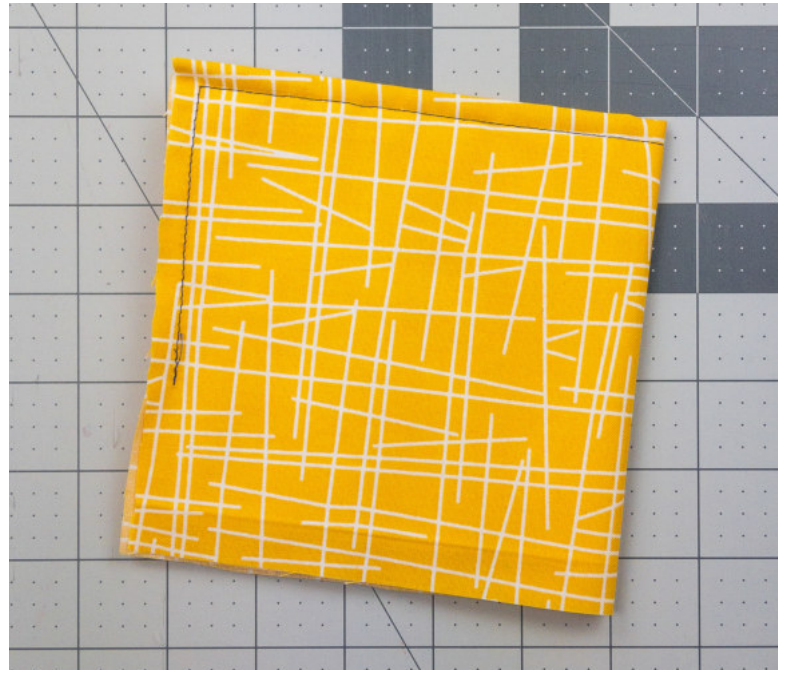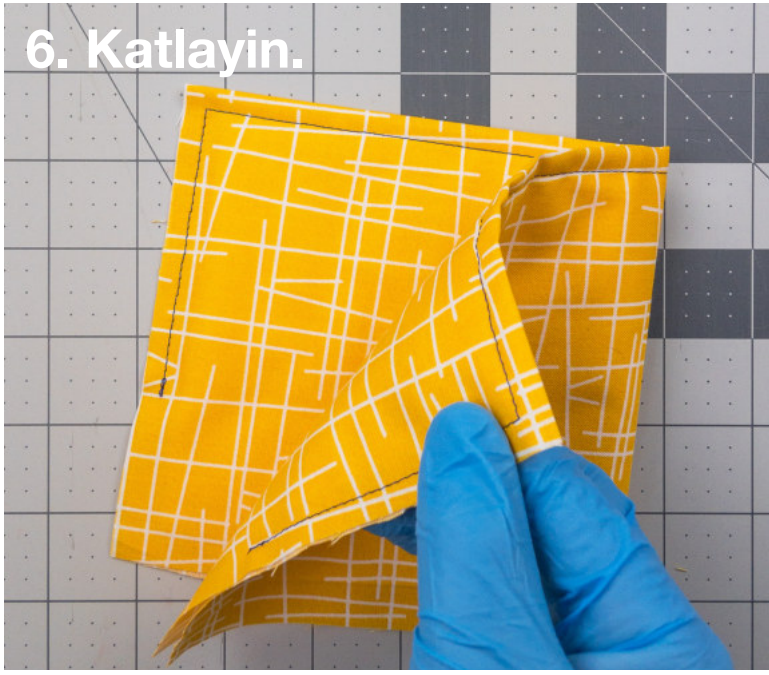

7. İşaretleyin.



Sayfa 1'deki şablonu kullanın.



8. Dikin.



9. Kesin.



10. İçini dışa doğru



11. Kayış yerlerini işaretleyin.




12. Maskenin dış yüzüne kayışları dikiş.

Kayışları takmanın daha hızlı bir yolu için sondaki "Profesyonel İpuçları" kısmına bakın.





13. Kabloyu burnun her iki tarafına esit mesafede olacak sekilde maskeye yerlestirin.

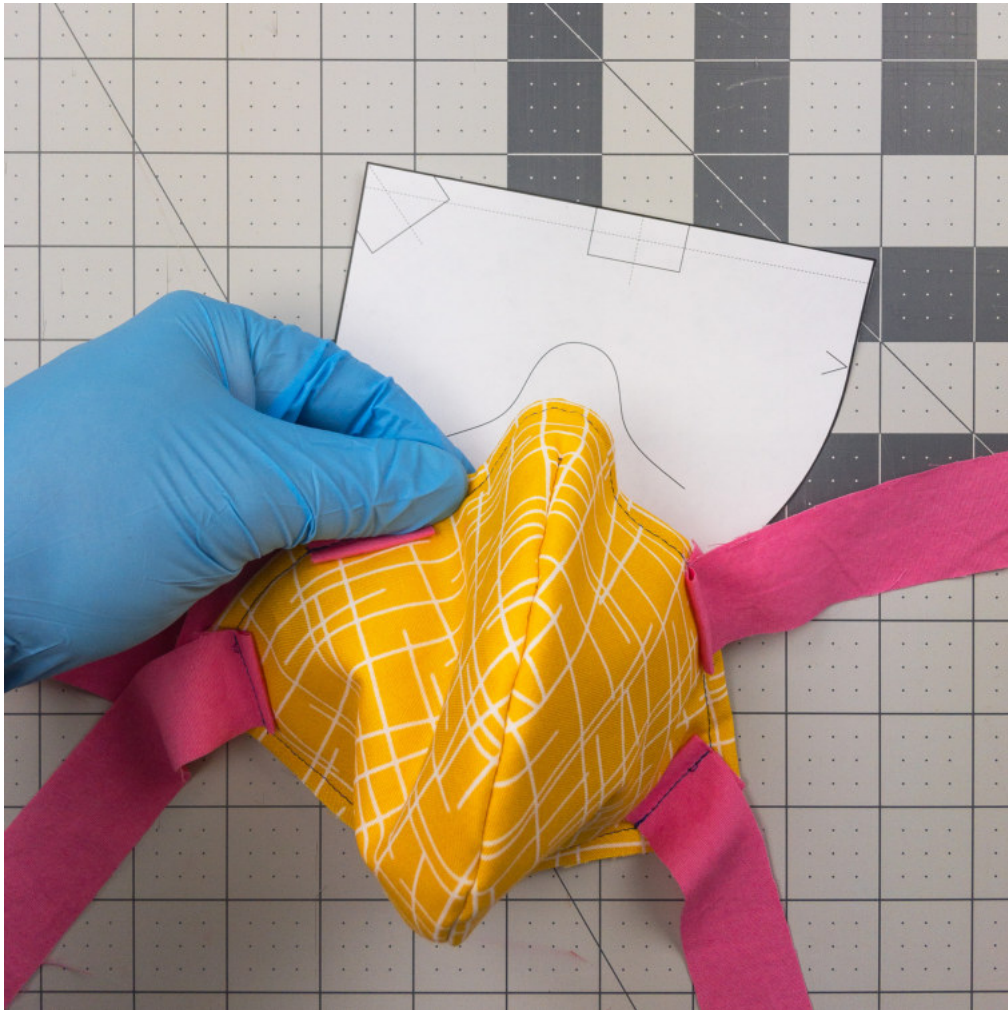

14. Teli yaklařık burun řekline getirin.

Aşınma & Bakım

Uydurma

Maskeye rahat, sıkı bir şekil vermek için burun telini ayarlayın. Başınızın arkasındaki üst kayışları kulakların üzerine ve başınızın arkasındaki alt kayışları kulakların altına bağlayın. Maskeyi ne kadar az ayarlama ihtiyacı duyarsanız o kadar iyidir (eller hastalık yayar), bu yüzden bütün ayarlamalarınızı maskeyi ilk taktığınızda yapın.

Kirlenme riskini azaltmak için maskenin iç ve dış dokusu ile teması en aza indirin. Maskenizi takmak ve almak için kayışları kullanın. Kolay çıkarılması için papyon düğümü veya ilmekli düğümü bağlayın.

Temizlik

Her kullanımdan sonra tüm maskeler temizlenmelidir.

Bakım ve temizlik, maskeyi hangi malzemelerden yaptığınıza bağlı olacaktır. Bir filtre tabakası kullandıysanız, bu onu bir çamaşır makinesine koyabileceğinizi belirleyebilir. (İpucu: maskeyi yapmadan önce malzemeleri yıkayın ve kurulayın, böylece daha sonra kumaş çekip küçülmez).

Burun telinin tipine ve kalınlığına bağlı olarak, temizlemeden önce çıkarmak mantıklı olabilir.



Profesyonel İpuçları:

Kolay ve Çabuk Kayışlar

Daha fazla ipucu için, şu adresi ziyaret edin: ragmask.com/pro

1. Birinci sayfadaki şablonunun bir kopyasını yazdırın ve şablonu kesin. İlk katlamayı yaptıktan sonra, kayış merkezlerini işaretleyin.



2. İlk dikişin bir parçası olarak kayışları dikişin. (Daha fazla dayanıklılık için kayışların



3. Kayışlar maskenin içinden gelecek şekilde yarıya katlayın, işaretleyin, dikişin ve önceden olduğu gibi kesin.

