


ragmask v2.3b2

ragmask.com

1. In duy nhất trang này.


(Bạn sẽ không cần in những trang dưới, hãy tiết kiệm giấy!).

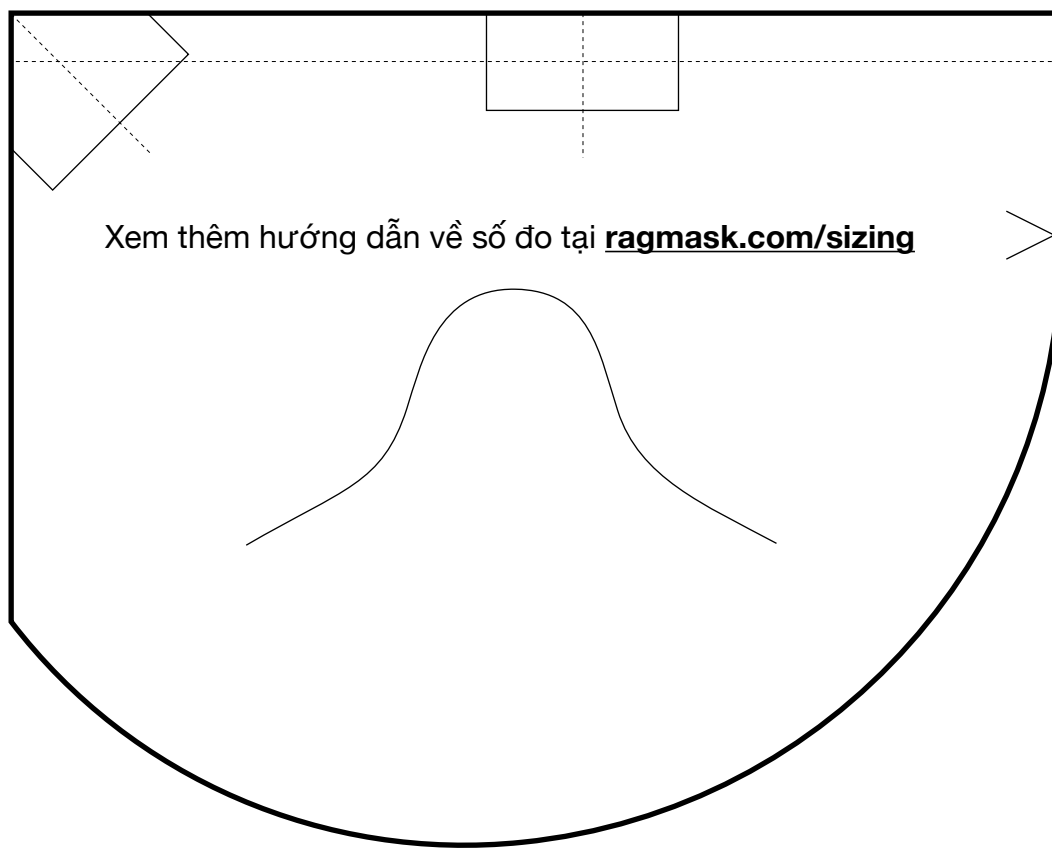

Xem thêm hướng dẫn về số đo tại ragmask.com/sizing

2. Kiểm tra thước của bạn.

Bạn cần in đúng kích cỡ. Thước của bạn phải cùng số đo với thước in dưới đây.

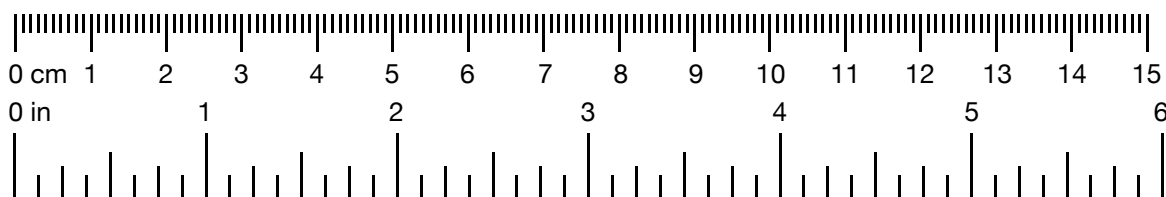


3. Cắt vải.

1 miếng vải kích cỡ 11"x11" (28x28cm), 1 miếng vải cho 1 khẩu trang

Tốt nhất nên dùng vải thun dệt, có thể dùng bao gối cũ, ra giường, hoặc khăn lau bát; Mật độ vải (TC) càng cao càng thích hợp. Để xem thêm thông tin về chất liệu vải và các mẹo vặt khác, vào trang ragmask.com/materials

4 miếng dây đeo 16" (40cm), 4 dây cho 1 khẩu trang

Sử dụng băng vải, hoặc các chất liệu không bị xù lông, nếu không có, bạn có thể cắt miếng vải bạn dùng để làm khẩu trang thành bốn dây với chiều rộng 1" (2.5cm)

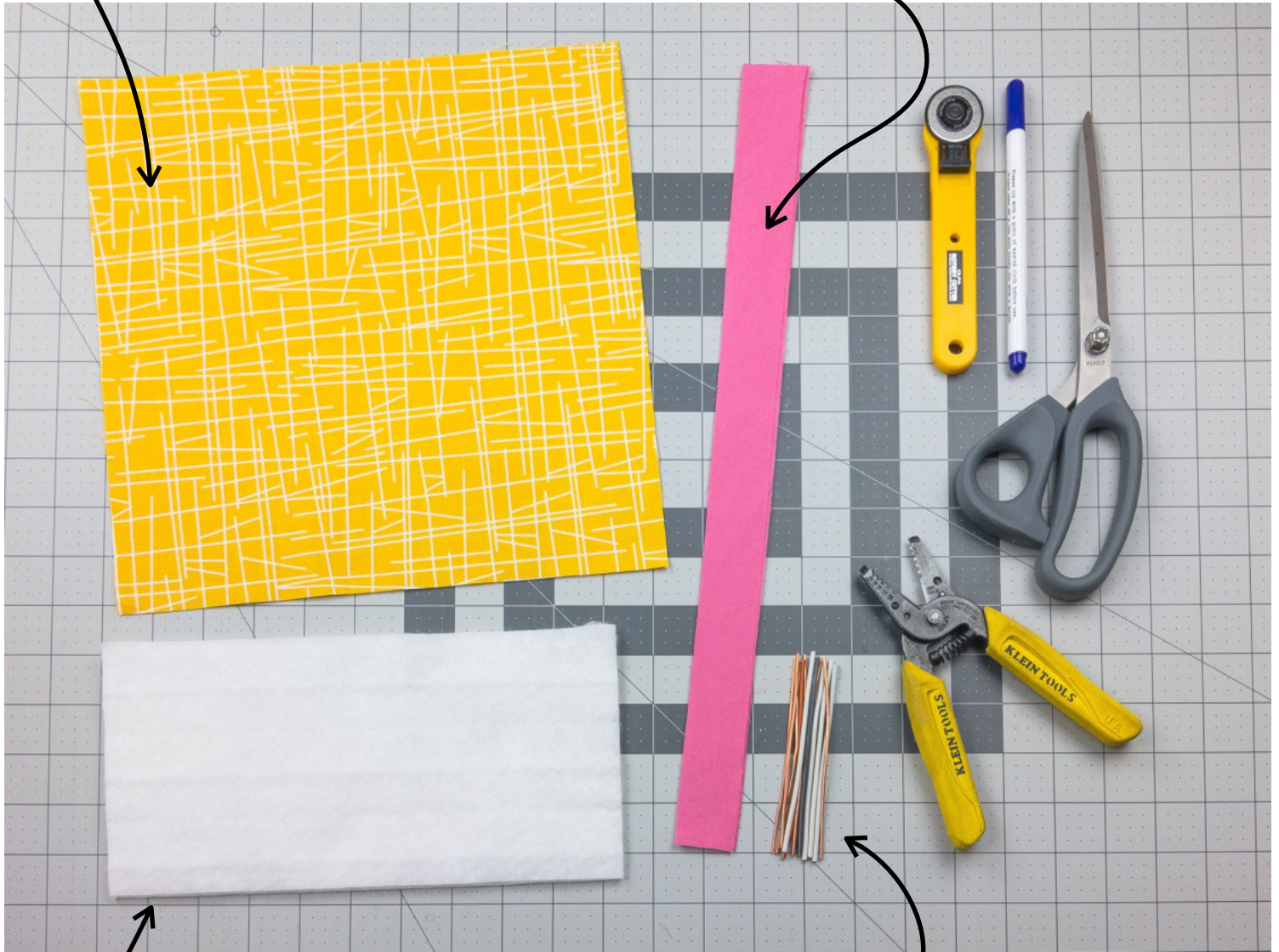

1 Dây kim loại 4" (10cm), 1 dây cho 1 khẩu trang, nếu có nên sử dụng dây đồng 14 ga



Để biết thêm nhiều lựa chọn cho phần dây kim loại ngay mũi, xem ragmask.com/materials

1 Màng lọc (filter) 10"x5" (26x13cm) (không bắt buộc), 1 miếng cho 1 khẩu trang

Có thể bỏ qua lớp màng lọc (filter)! Chỉ sử dụng vải vẫn mang lại hiệu quả.


1 lựa chọn khác là sử dụng miếng bông mỏng để tạo dáng khẩu trang.

4. Bỏ lớp màng lọc (filter)
vào trong mảnh vải.

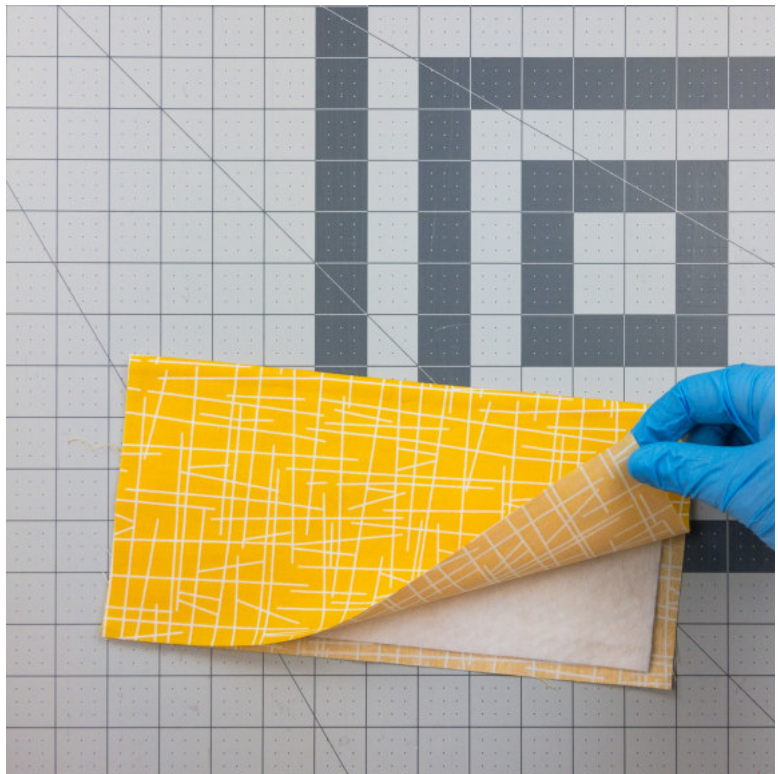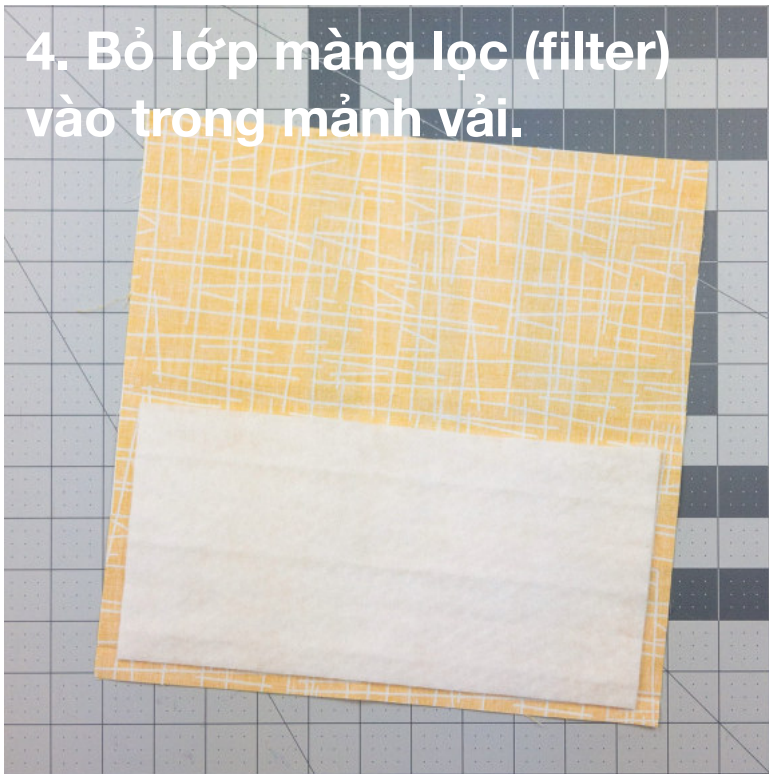


5. May vòng quanh 3 cạnh.


Chừa khoảng 3/16" (0.5cm) từ mép vải, (may nhanh > may đẹp)

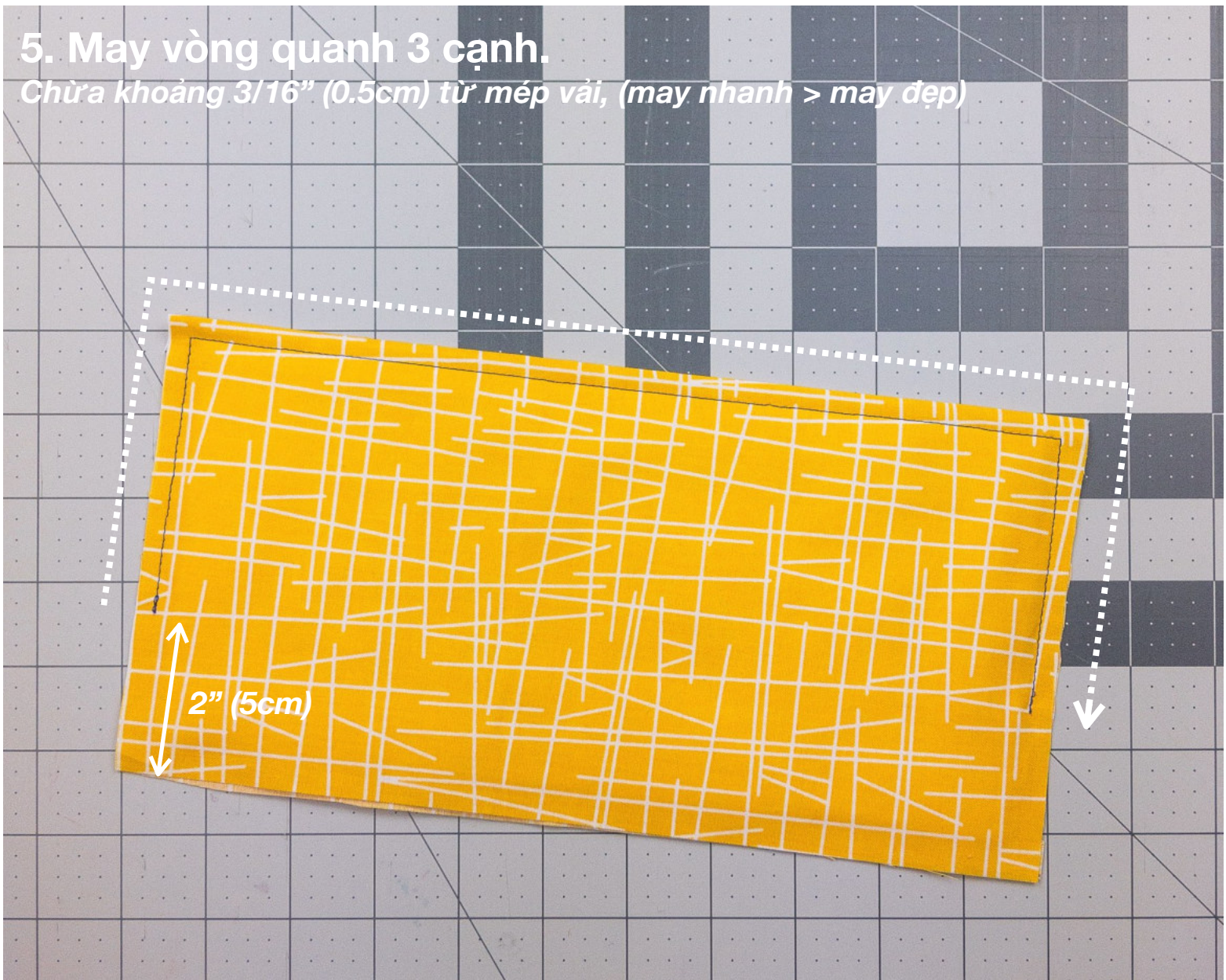

6. Gấp lại.

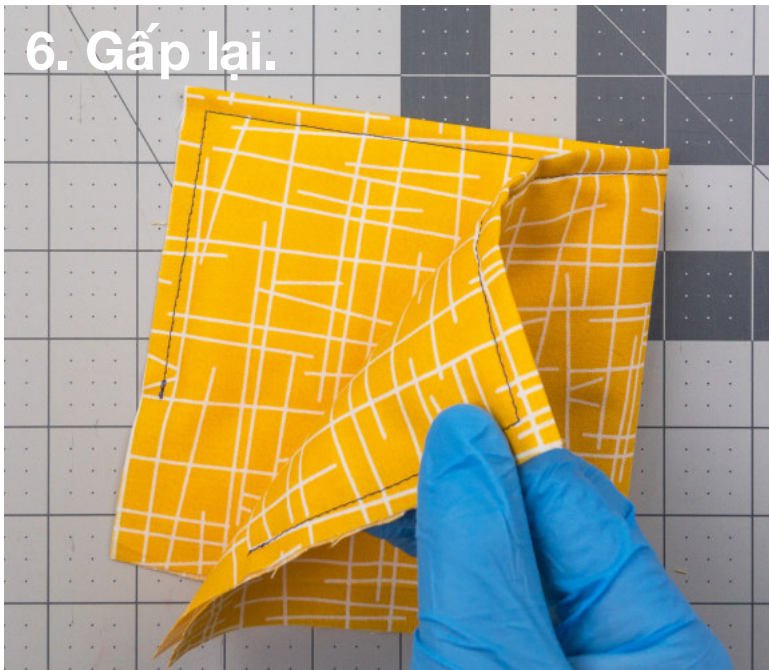

7. Đánh dấu.

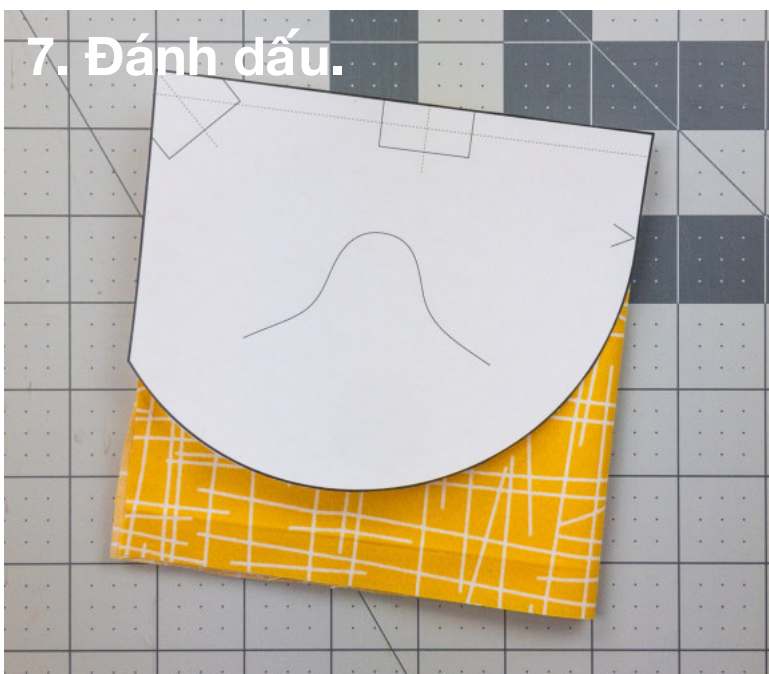

Sử dụng mẫu ở trang đầu tiên
bạn in.



8. May.



Bắt đầu từ đây

9. Cắt.



10. Trở mặt vải.



11. Đánh dấu vị trí dây đeo.




12. Khâu dây lên mặt ngoài khẩu trang.

Xem thêm các mẹo ở trang cuối để gắn dây nhanh hơn





13. Luồn dây kim loại vào khẩu trang, vị trí trên và cạnh sao cho phần mũi nằm giữa dây kim loại.

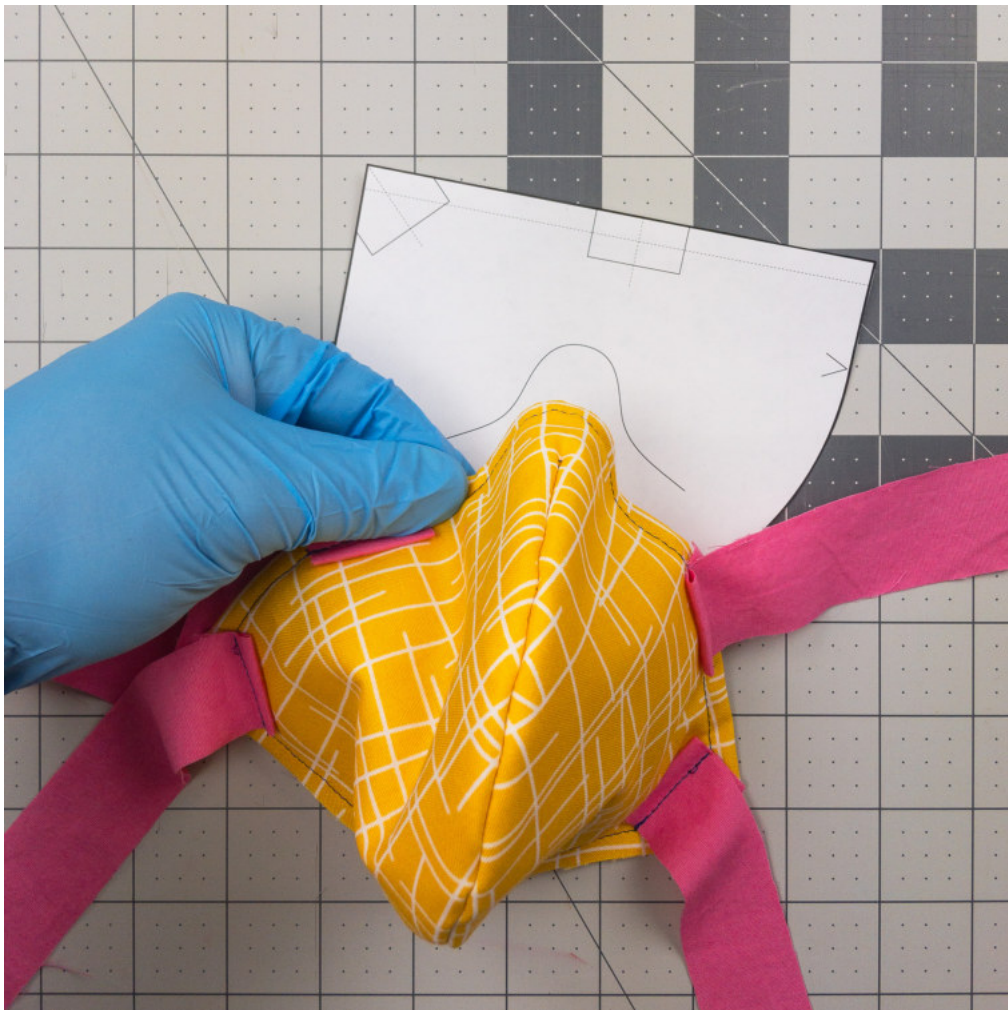

14. Chỉnh dây kim loại theo dáng mũi.

Cách đeo và bảo quản

Chỉnh khẩu trang cho vừa vặn

Điều chỉnh dây kim loại sao cho phần mũi vừa khít và thoải mái. Cột hai dây đeo trên sau đầu, trên hai lỗ tai; hai dây đeo dưới ở dưới lỗ tai, sau gáy. Bạn cột sao cho tay không cần chạm đến phần khẩu trang (để hạn chế các bệnh truyền nhiễm), vì vậy, lúc bạn vừa đeo lên, cứ dành thời gian để điều chỉnh đến khi cảm thấy thoải mái.

Vui lòng không tiếp xúc với bề mặt khẩu trang để hạn chế truyền nhiễm. Chỉ sử dụng phần dây để đeo và tháo khẩu trang. Có thể cài thêm nút thắt để gỡ khẩu trang nhanh hơn.

Vệ sinh khẩu trang

Tất cả các khẩu trang cần được giặt sạch sau khi dùng.

Cách bảo quản và giặt tùy theo chất liệu vải bạn sử dụng. Cần thận nếu bạn dùng màng lọc (filter), có thể sẽ không giặt máy được. (Tips: giặt và sấy miếng vải trước khi làm khẩu trang để tránh co rút sau này)

Tùy vào chất liệu và độ dày của phần dây kim loại, bạn có thể sẽ phải tháo phần dây này trước khi giặt.

Nếu bạn ngại phần góc bị xơ lông hoặc muốn làm khẩu trang bền và chất lượng hơn, túi mình đang thêm vào nhiều mẹo khác dành cho những bạn có kỹ thuật may tốt hơn tại ragmask.com/pro.

Để cập nhật thông tin mới nhất, vào trang ragmask.com.



Mẹo: Khâu dây nhanh

Xem thêm các mẹo khác tại ragmask.com/pro

1. In thêm 1 bản ở trang đầu tiên, cắt theo mẫu. Sau khi gấp lại lần đầu, đánh dấu các dây.



2. Khâu dây ngay đường chỉ đầu. (Khâu dặm lên dây cho bền hơn).



3. Gập phân nửa (phần dây ở mặt trong khẩu trang), đánh dấu, may & cắt như trước.

