


ragmask v2.3b2

ragmask.com


1. 一ページ目だけを印刷してください。

紙を節約する為、他の印刷は不要です。

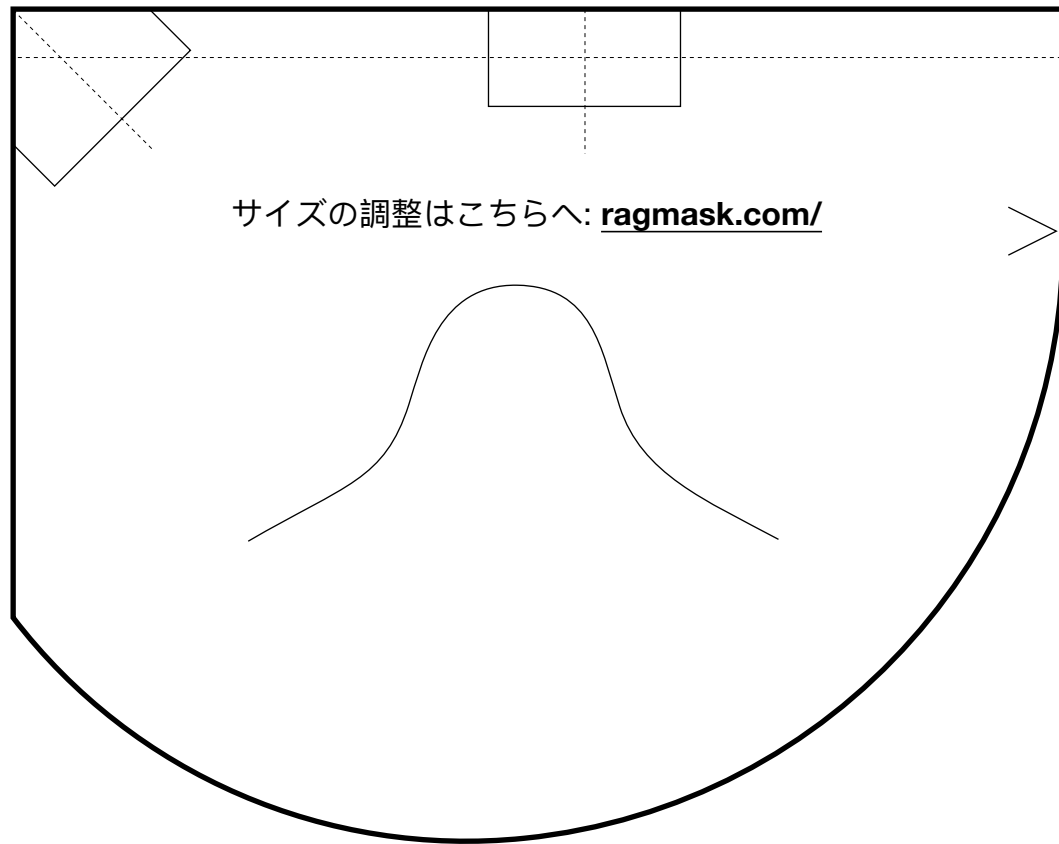

2. スケールを確認。

適切なサイズで印刷されていることを確認してください。実際の長さは、以下の長さと一致する必要があります。

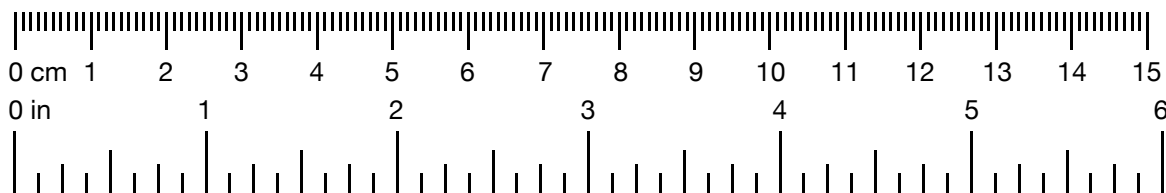


3. 素材を切る

マスク毎に28x28cm の生地を利用してください。

最適な生地はしっかりとしたコットンです。古い枕カバー、シーツ、またはふきんを探してください。スレッド数が多いほど良いです。生地の情報・ヒントについては、ragmask.com/materials をご覧ください

マスク毎に4つの40cm のストラップ紐が必要です。

ツイルテープまたはほつれない別の素材が最適ですが、ない場合は、マスクに使用するのと同じ生地の2.5cmの帯をカットしてください。


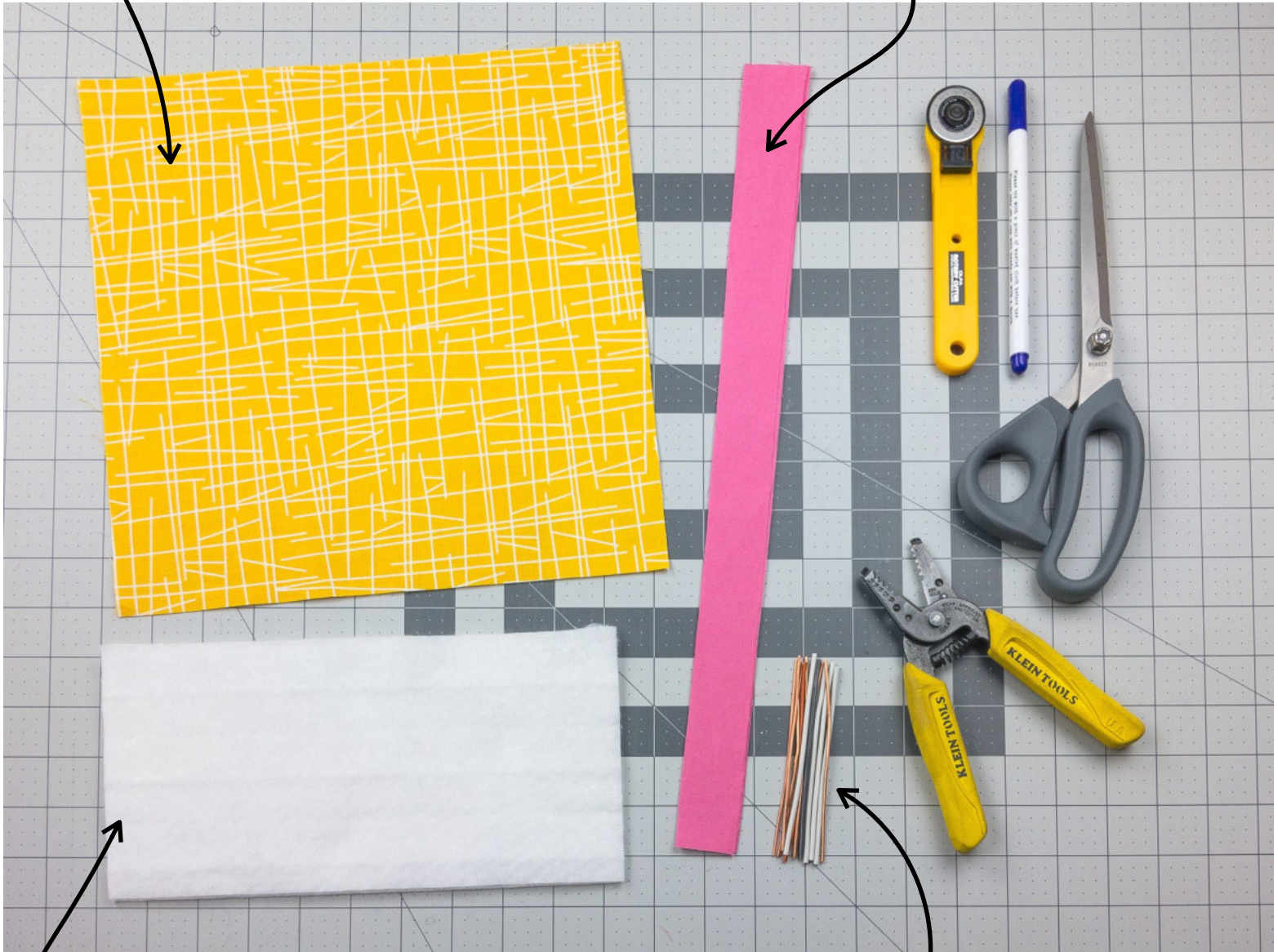


マスク毎に10cm のメタルワイヤーが必要です。例えば、14ga銅線はうまく使えます。
ノーズワイヤーのさまざまなオプションについては、ragmask.com/materials をご覧ください


マスク毎に26x13cmのフィルター（必須ではない）を入れられます。

フィルターを入れなくても、布だけでも効果があります。薄いキルト芯も、マスクの形を調整する良い選択肢です。


4. フィルターの上に布を
折ってください

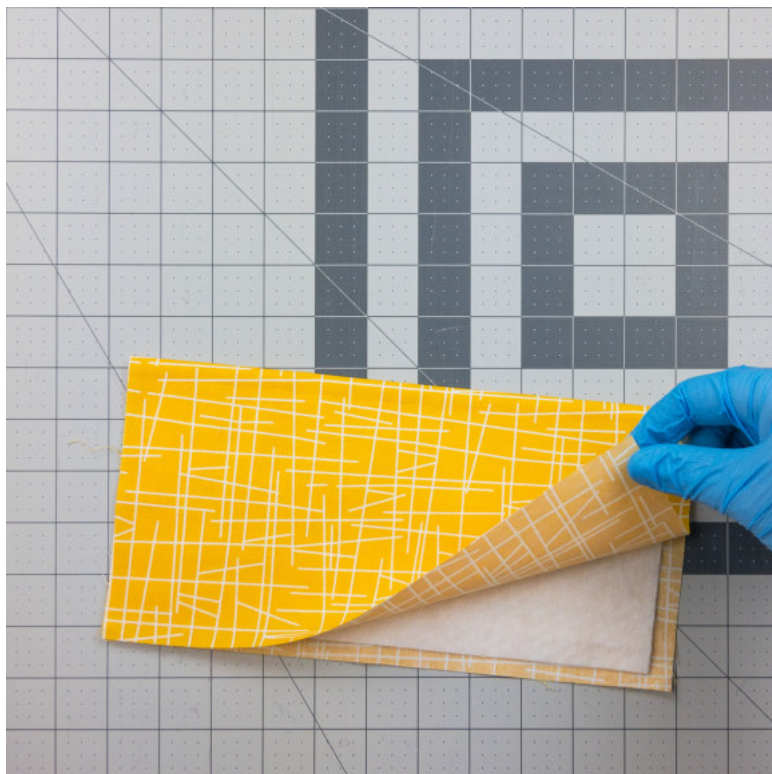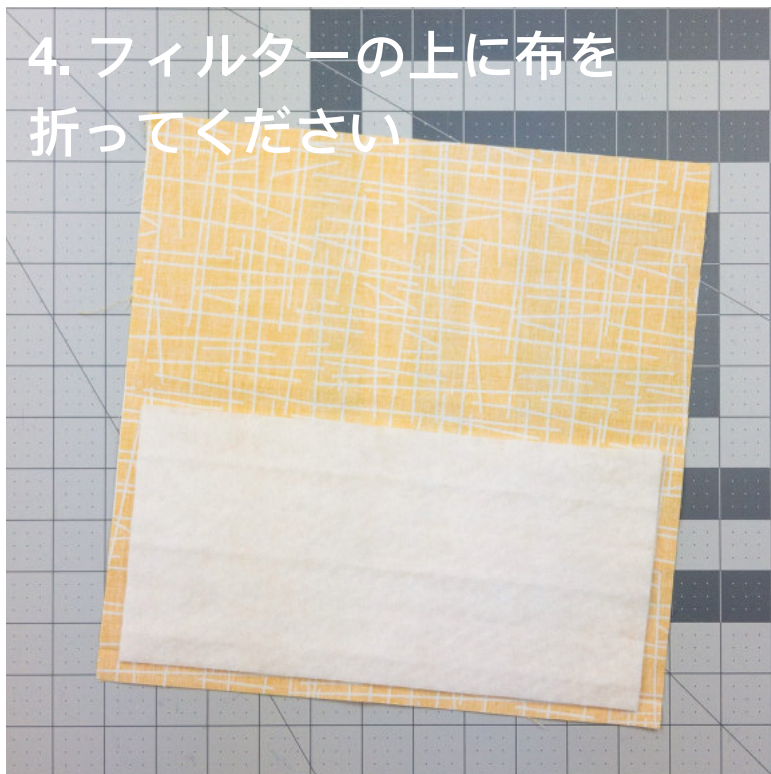


5. 3つのサイドを縫ってください。縫い代は0.5cm。ス
ピード > 綺麗さ

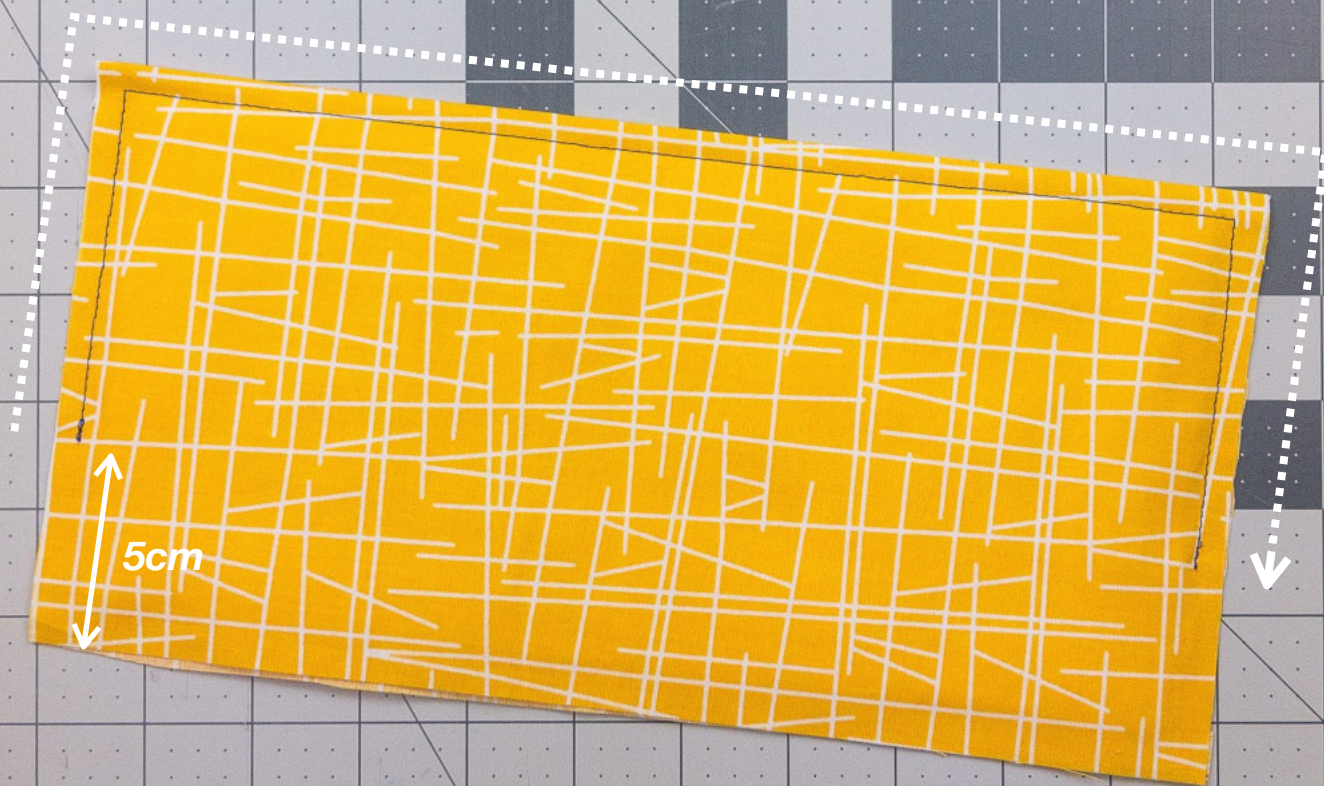


6. 折る

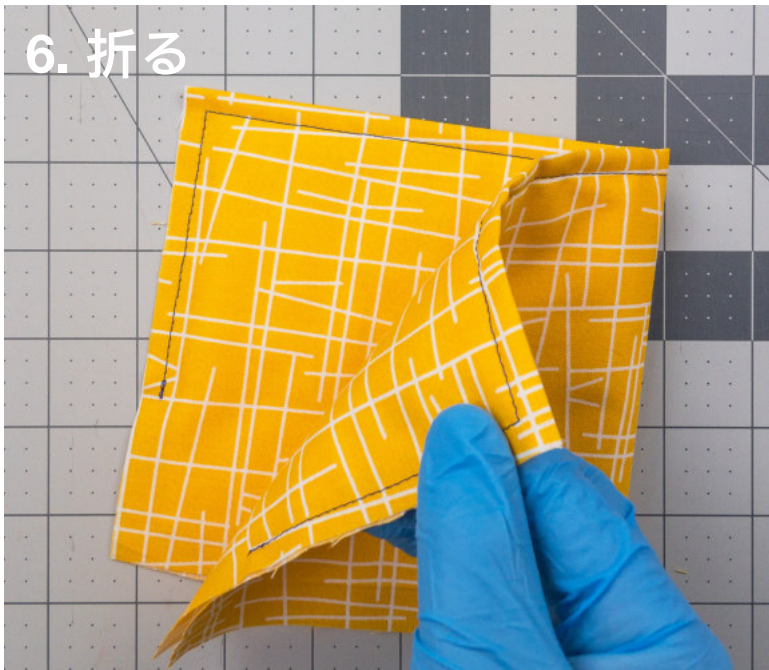


7. マークする

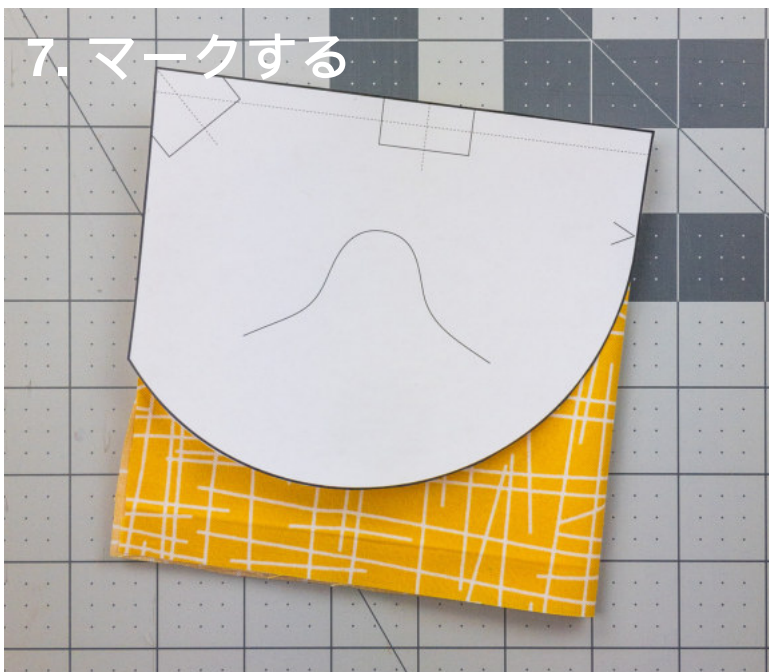


一ページ目の型紙をご利用ください。

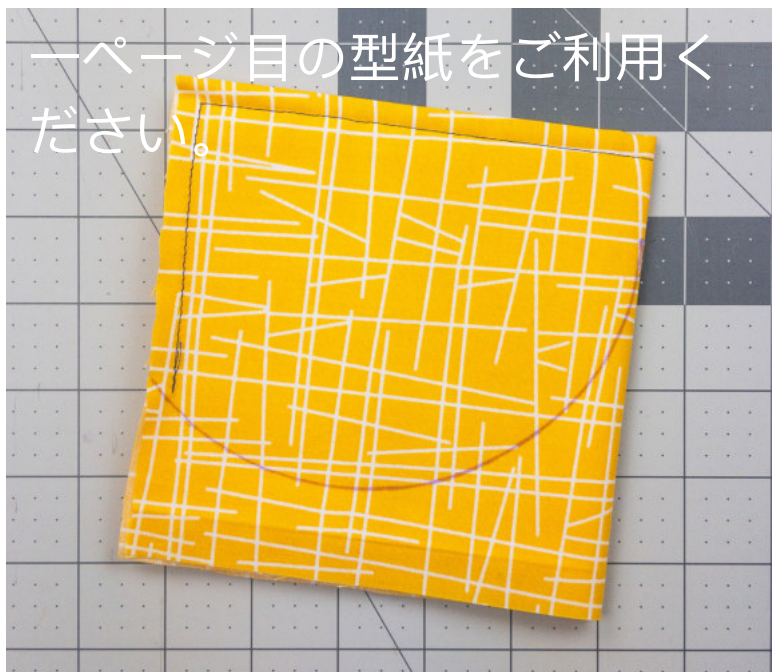

8. 縫う

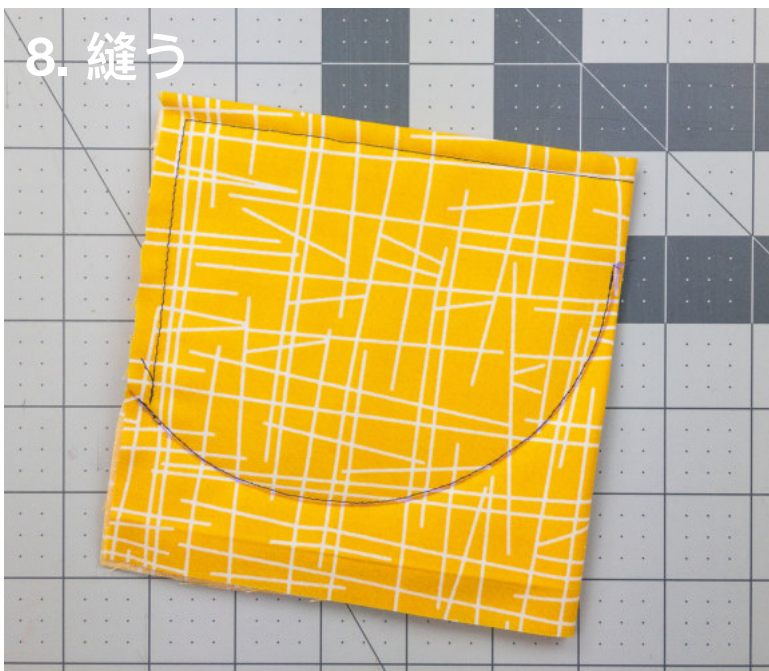


9. 切る

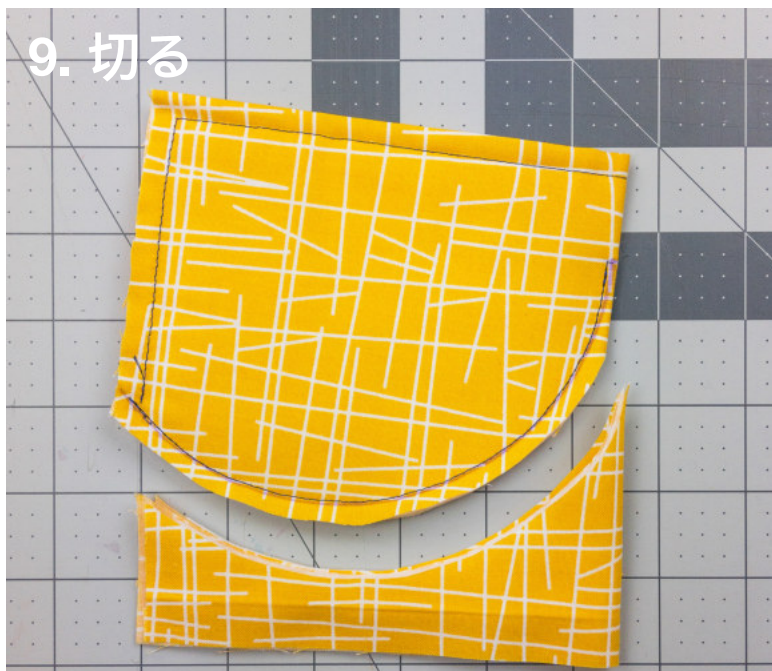

10. 裏返しする



11. ストラップの位置をマークしてください。

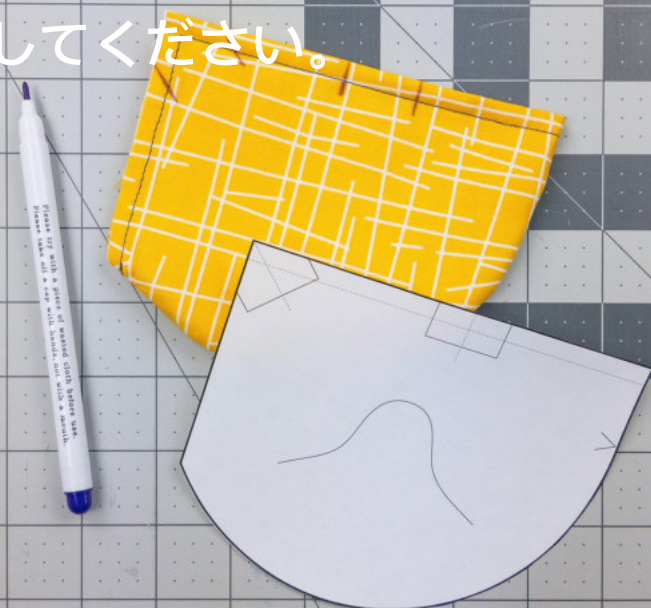


12. マスクの外面（表）にストラップを縫ってください。





13. 鼻の上と真ん中にワイヤーを入れて

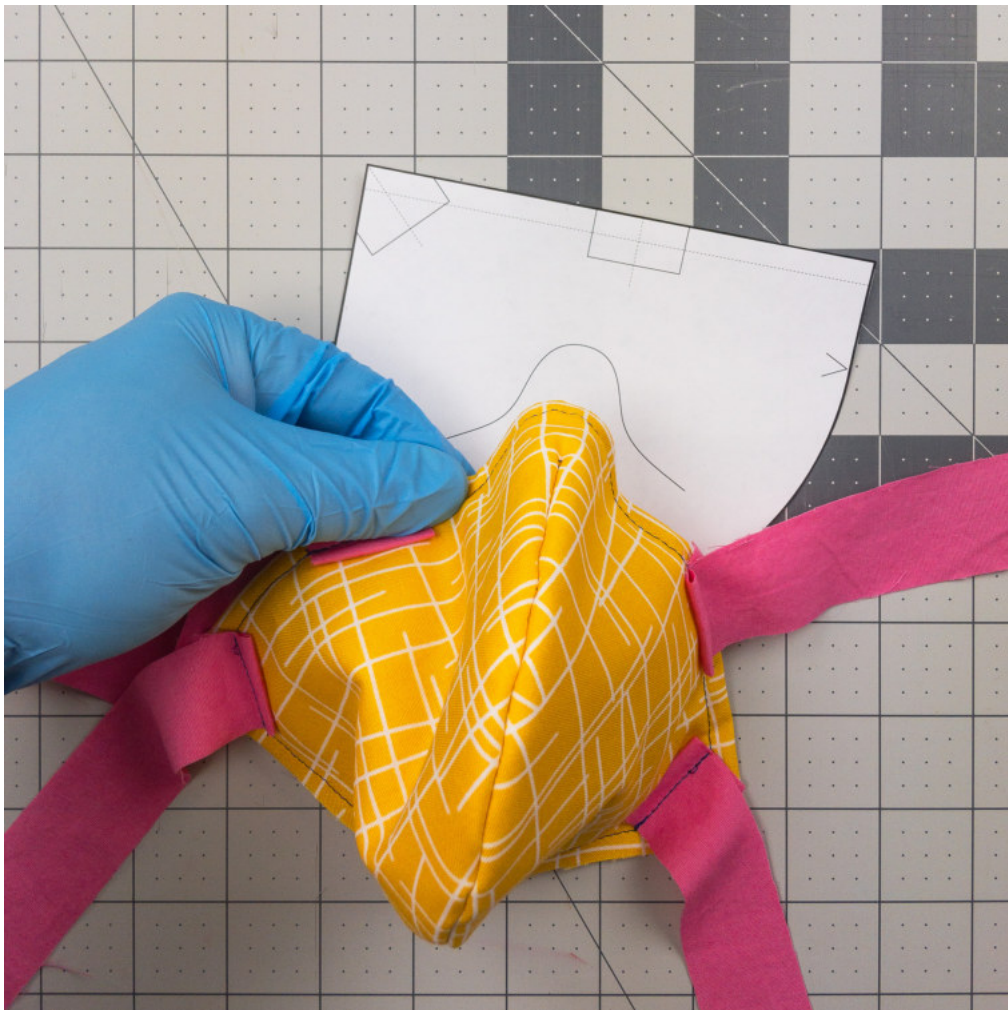

14. ワイヤーを鼻の形に合わせて、

Wear & Care

フィットするように仕上げていきます。

マスクをしっかりと密着し快適に装着するためには、ノーズワイヤーを調整してください。上部のストラップを耳の上・頭の後ろに、下部のストラップを耳の下・頭の後ろで結んでください。マスクを触る必要が少なければ少ないほど効果的です（ウィルスが手指に付着する）。従って、最初に装着するときは、時間をかけて調整をしてください。

マスクが汚染されるリスクを減らすために、なるべくマスクの裏と表のファブリックに触れないように。マスクを着脱する時に、ストラップを使用してください。簡単に取り外せるように、リボンまたはスリップノットを結んでください。

クリーニング

すべてのマスクは、使用後に毎回洗浄する必要があります。

ケアとクリーニングは、マスクの素材によって異なります。フィルター層を使用した場合、洗濯機で洗えるかどうか素材によります。（ヒント：マスクが縮まないように、布を事前に洗い、乾燥させてください。）

ノーズワイヤーの種類と厚さによっては、クリーニングの前に外した方が良くかもしれません。

生地の手触りが気になる場合は、ragmask.com/proに、丈夫さと品質のプロのヒントを追加しました。

最新情報については、ragmask.comをご覧ください。





プロのヒント: 早いストラップ

他のヒントはこちらへ:

ragmask.com/pro

1. 一ページ目をもう一度印刷し、テンプレートをトリムしてください。最初に折りたたんだ後、ストラップの中央にマークを付けてください。



2. 最初のステッチの一部としてストラップを縫ってください。(耐久性を向上させる為、ストラップにバックステッチしてください。)



3. 半分に折り (折り目の内側にストラップ)、前と同じようにマーク、縫い、カットしてください。