


ragmask.com

Você não precisa das outras páginas, economize papel.




Certifique-se de que imprimiu no tamanho correto. Uma régua de verdade deve ter as medidas iguais a abaixo.

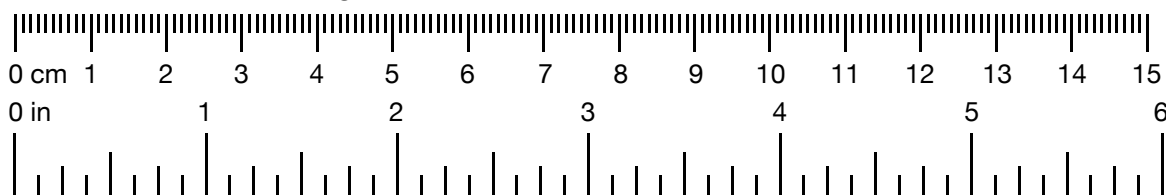

3. Corte os materiais.

28x28cm de tecido, **1** por máscara

2.5x40cm de tecido para as tiras, **4** pedaços por máscara

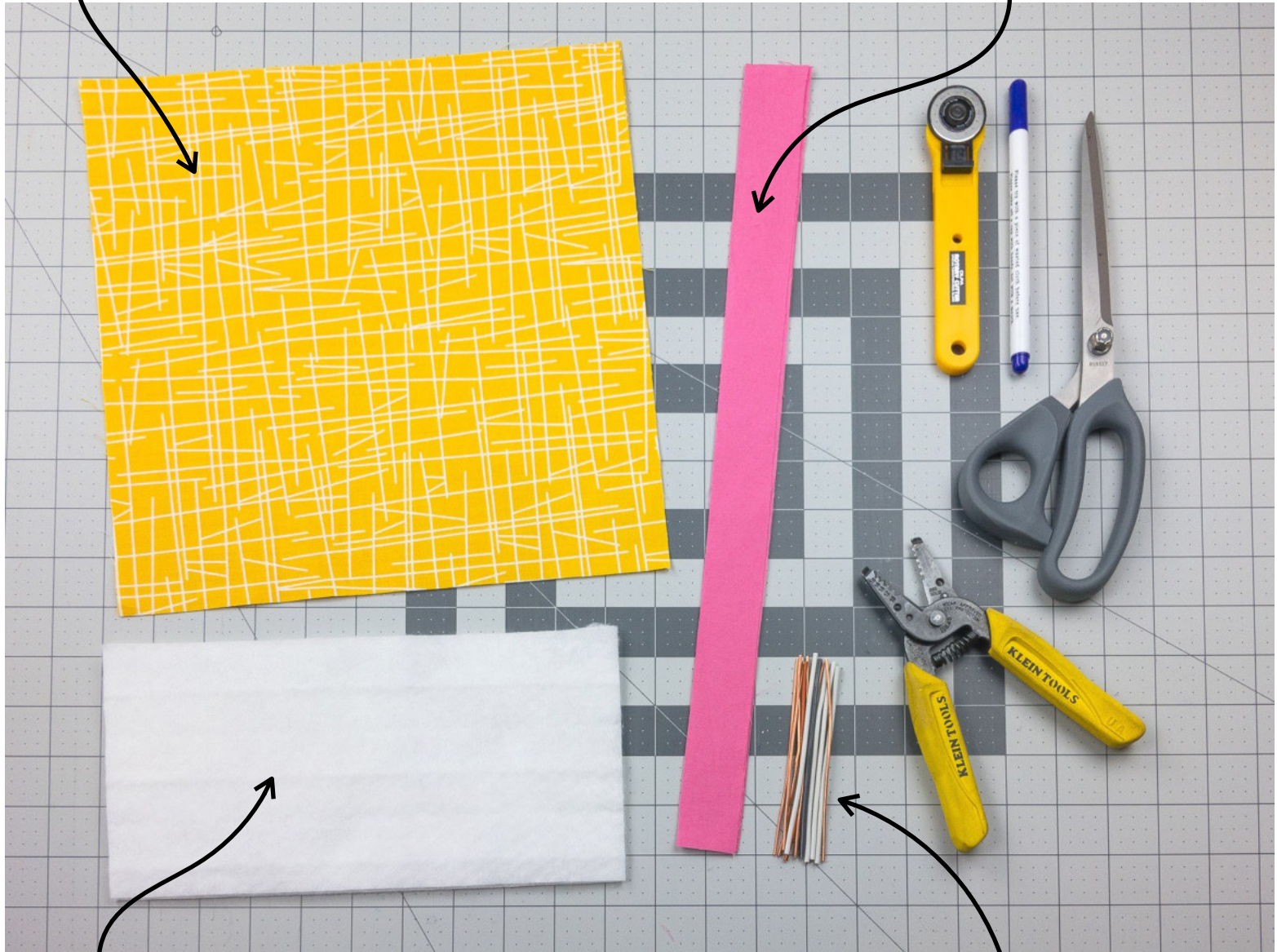

26x13cm filtro (opcional)*, **1** pedaço por máscara



10cm fio de metal, **1** pedaço por máscara, fio de cobre 14ga funciona bem

* Eficácia de vários materiais de filtro a serem divulgados.

Veja o site ragmask.com/materials para as informações mais recentes.


Mesmo sem o filtro (apenas tecido) pode ser mais efetivo que não usar máscaras.

4. Dobre o tecido sob o filtro.

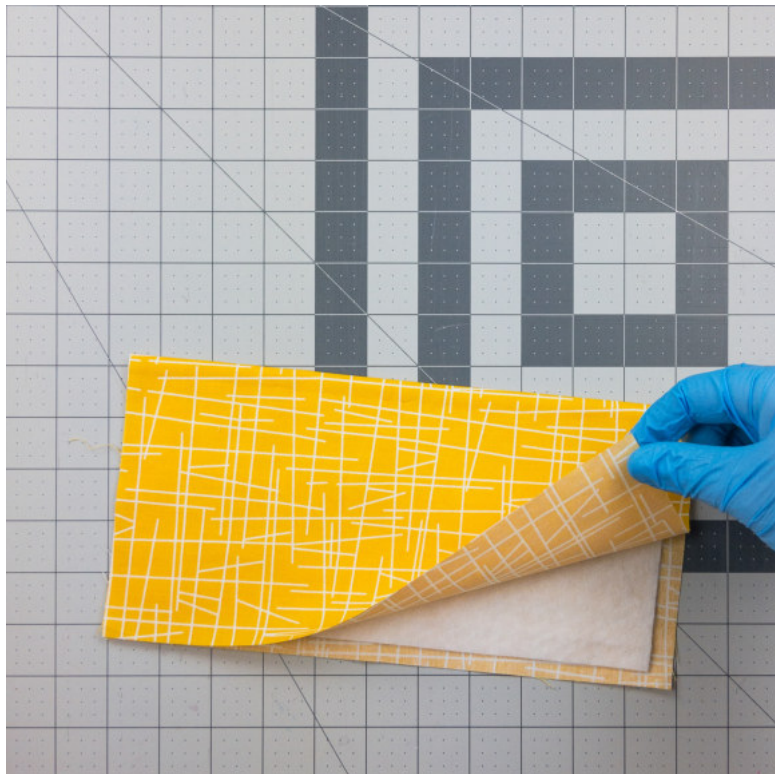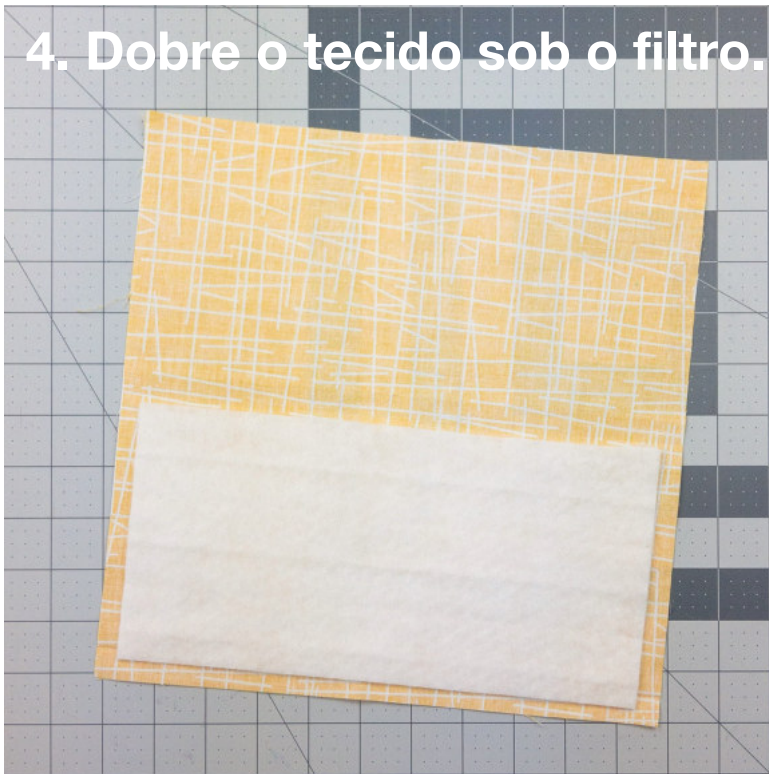


5. Costure os 3 lados.

~0.5cm de espaço pra costura, rápido > bonito.

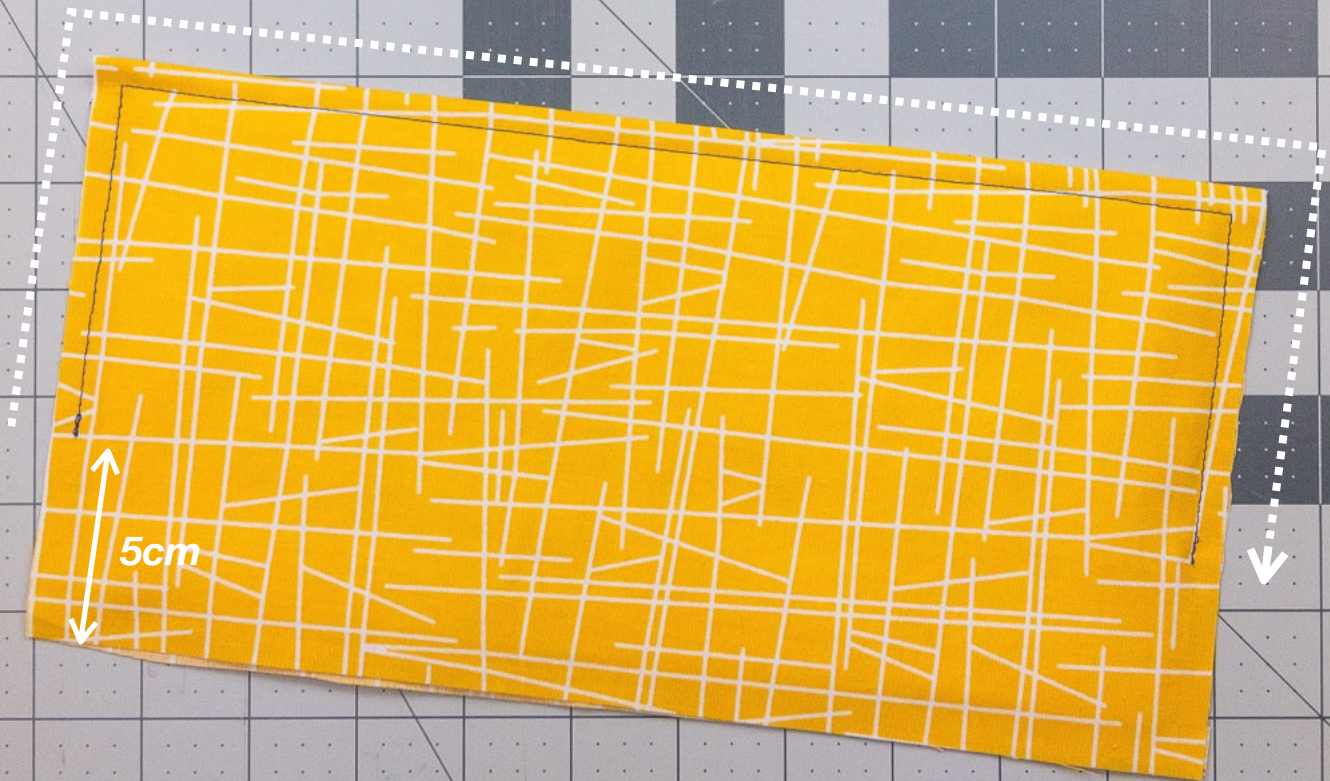

6. Dobre.

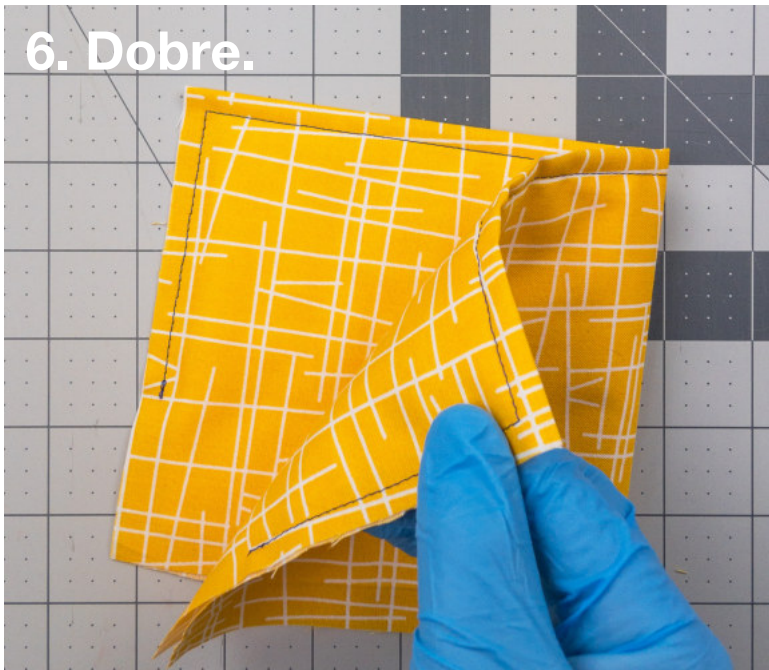

7. Faça as marcações.



Use o molde da página 1.



8. Costure.



9. Corte.



10. Vire do avesso.



11. Marque o local das tiras.




12. Costure as tiras do lado de fora da máscara.

Veja a última página para um jeito mais rápido ainda de instalar as tiras.





13. Insira o fio de metal e centralize em cima do nariz.

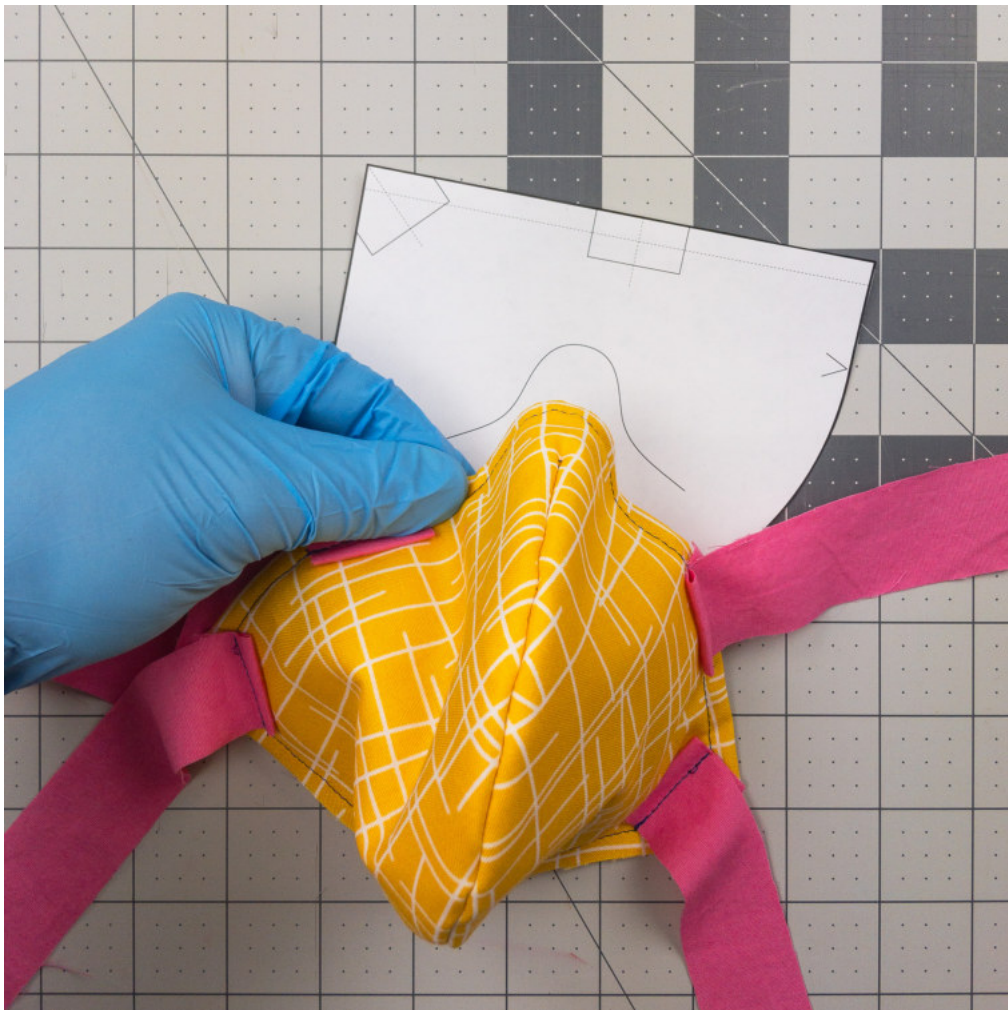

14. Modele o fio para que esteja de maneira aproximada à forma de um nariz.

Use

ragmask.com



Detalhes de uso e cuidado em breve...

Dicas: Tiras rápidas

Mais dicas em ragmask.com/pro



1. Imprima outra cópia da primeira página, corte o molde. Depois de fazer a primeira dobra, marque o centro das tiras.



2. Costure as tiras como parte da primeira costura (faça o ponto vai e vem nas tiras para ficarem mais seguras e duráveis).



3. Dobre no meio (tiras do lado de dentro da dobra), marque, costure & corte conforme ensinado anteriormente.