


ragmask v2.2

ragmask.com

2. Отпечатайте само тази страница.


Не ви трябва другите страници, не хабете хартията си.

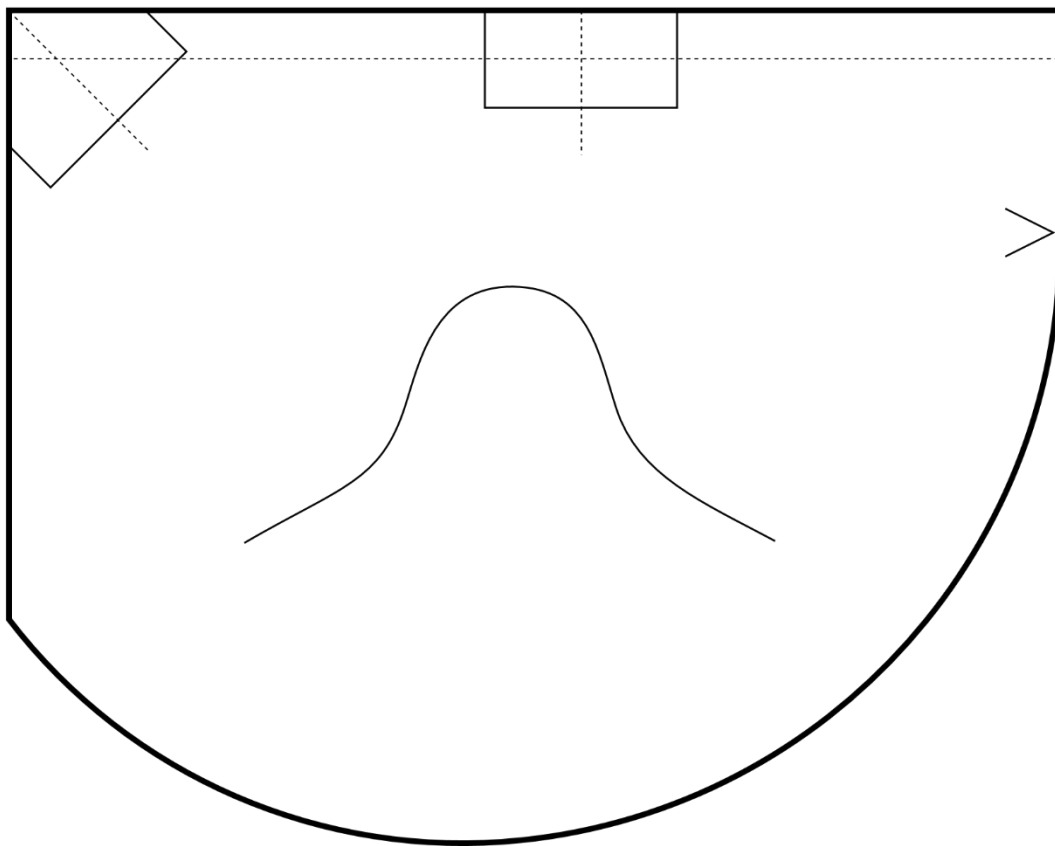

1. Проверете мащаба.

Уверете се, че сте отпечатали при подходящ мащаб.


Истинска линия би трябвало да съвпадне с тази долу.

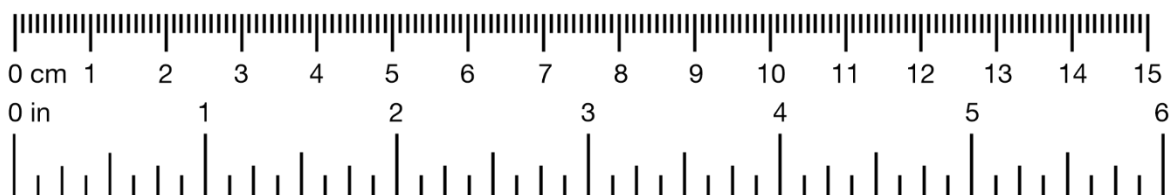

3. Изрежете материалите.

11"x11" (28x28cm) тъкан, по 1 брой на маска

1"x16" (2.5x40cm) тъкан за връзки, по 4 броя на маска

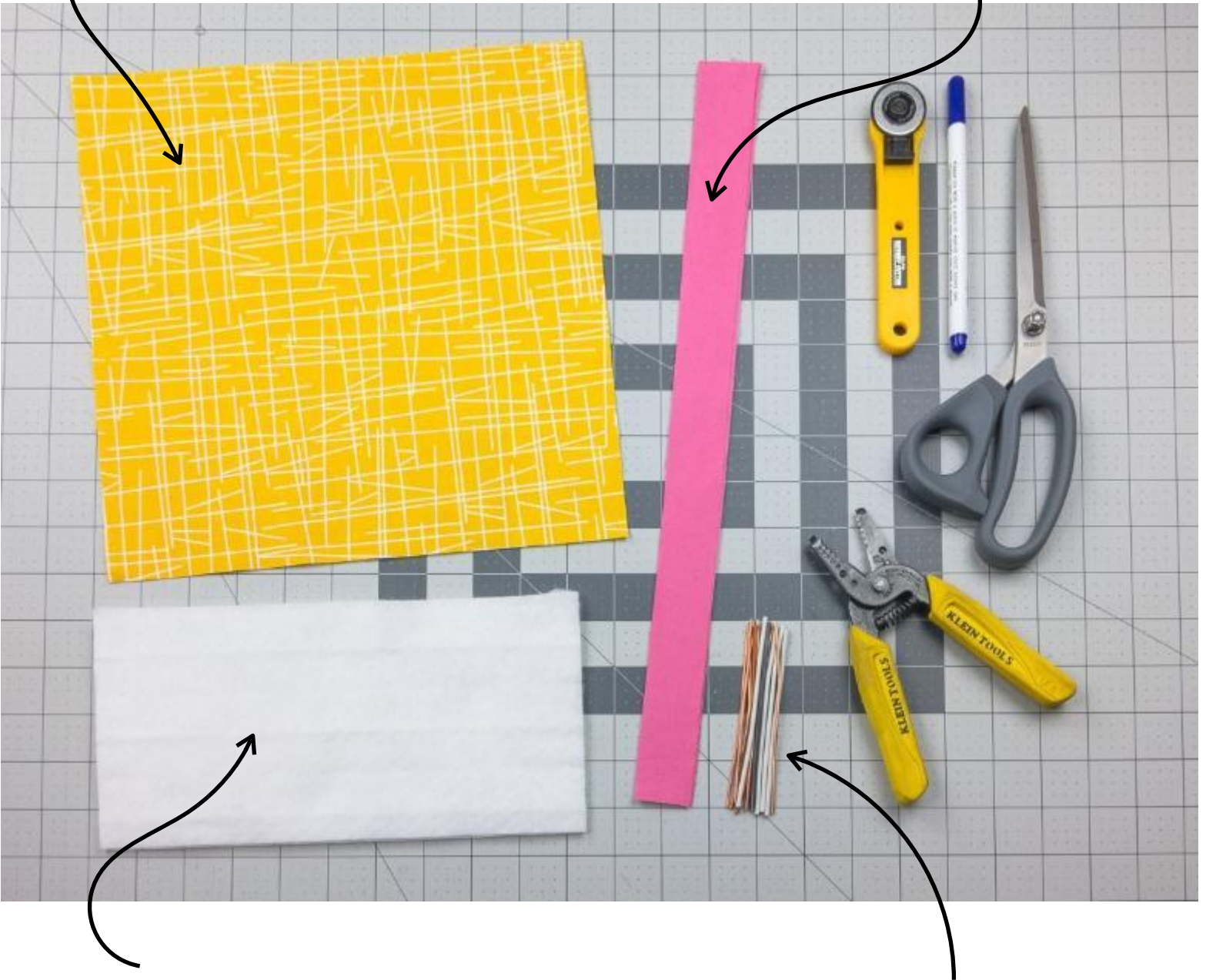

10"x5" (26x13cm) филтър (по желание)*, по 1 брой на маска


4" (10cm) метална тел, по 1 брой на маска, ~1.6 mm медна тел върши работа

* Ефективност на различни видове филтри предстои.

Посетете ragmask.com/materials за актуална информация.

Дори и без филтър (само тъкан) е по-ефективно от липсата на маска.

4. Прегънете плата върху филтъра

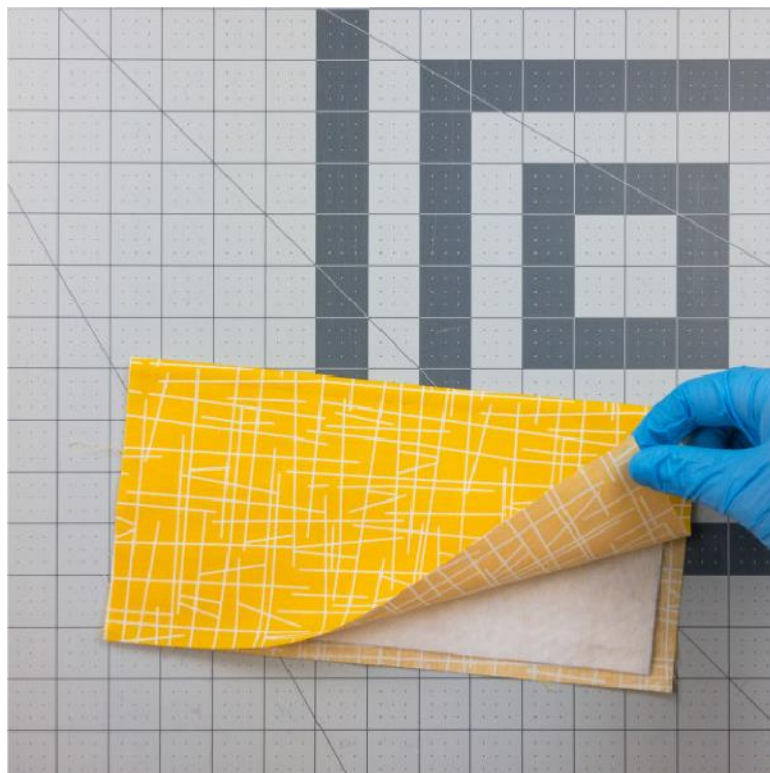


5. Зашийте три от страните


~3/16" (0.5cm) разстояние от ръба, бързина > красота.




6. Сгънете.

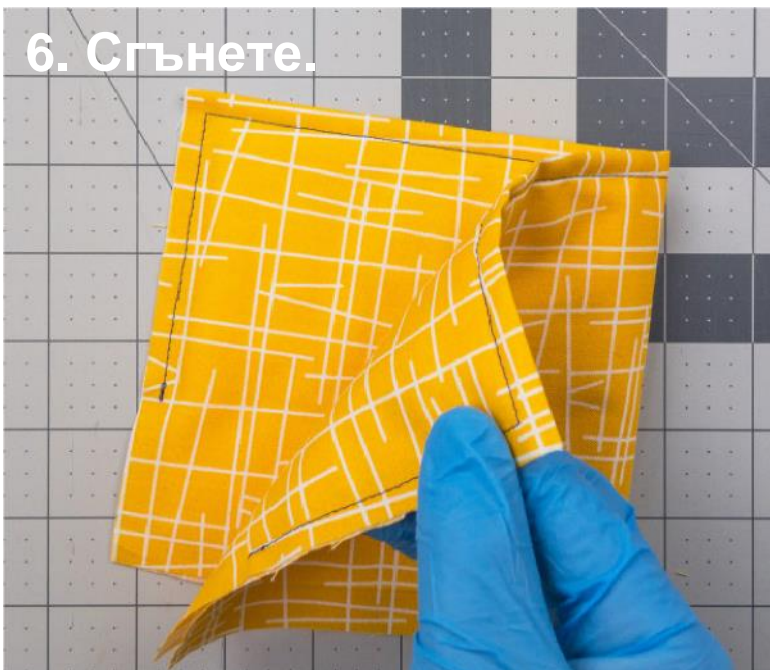


7. Отбележете.

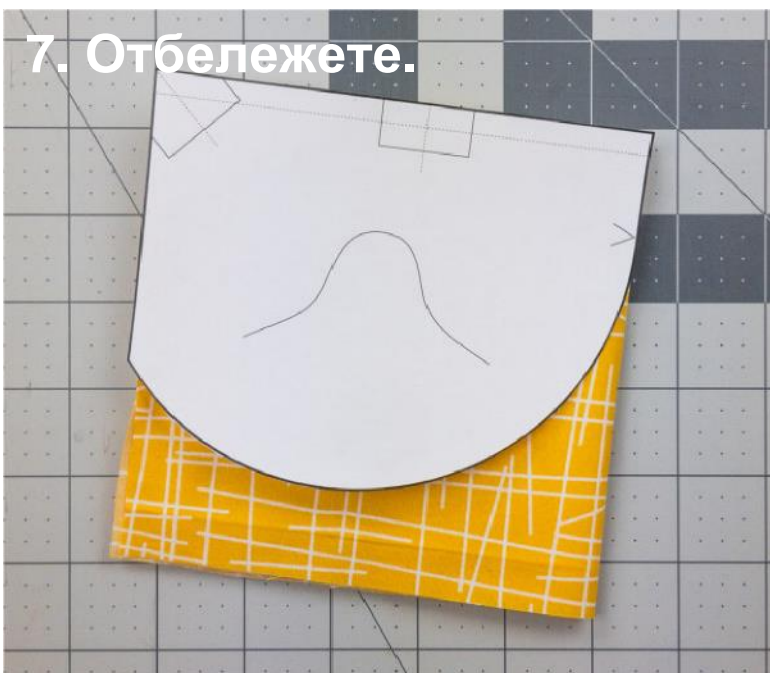


*Използвайте шаблона от
стр. 1*

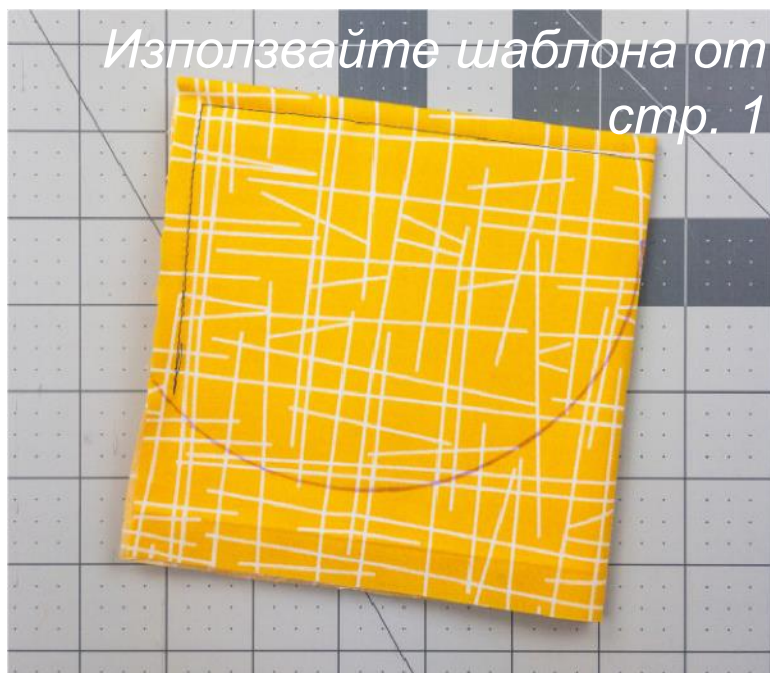

8. Зашийте.

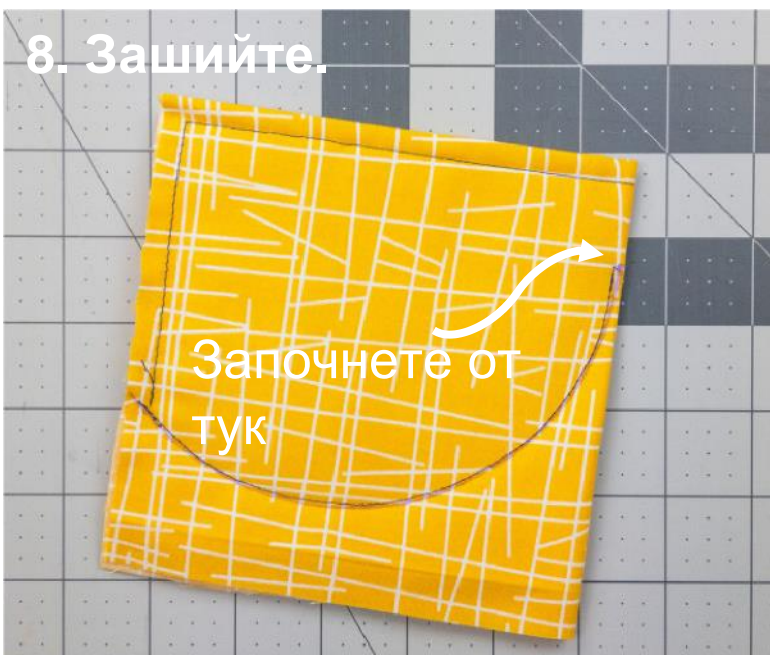


9. Изрежете.

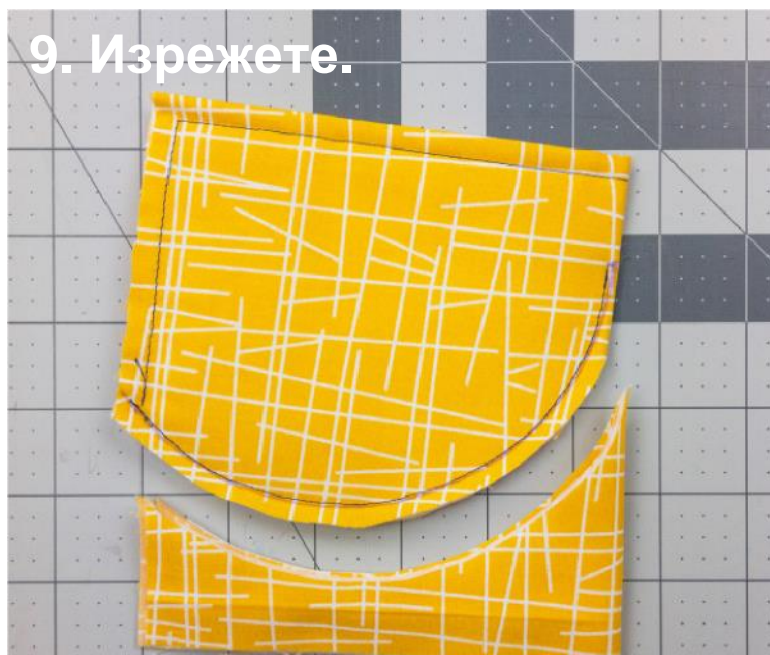

10 . Обърнете отвътре-
навън.




11. Отбележете мястото за
връзките

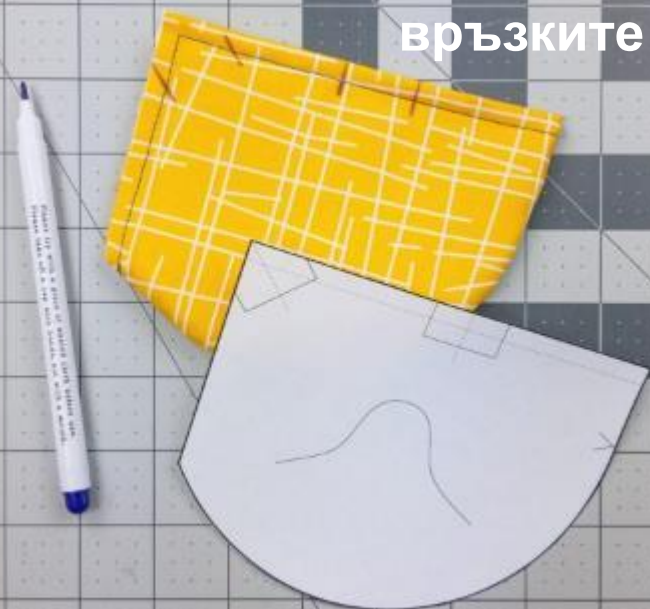


12. Зашийте връзките от външната страна на маската
*На последната страница има и още по-бърз начин за поставяне на
връзките.*



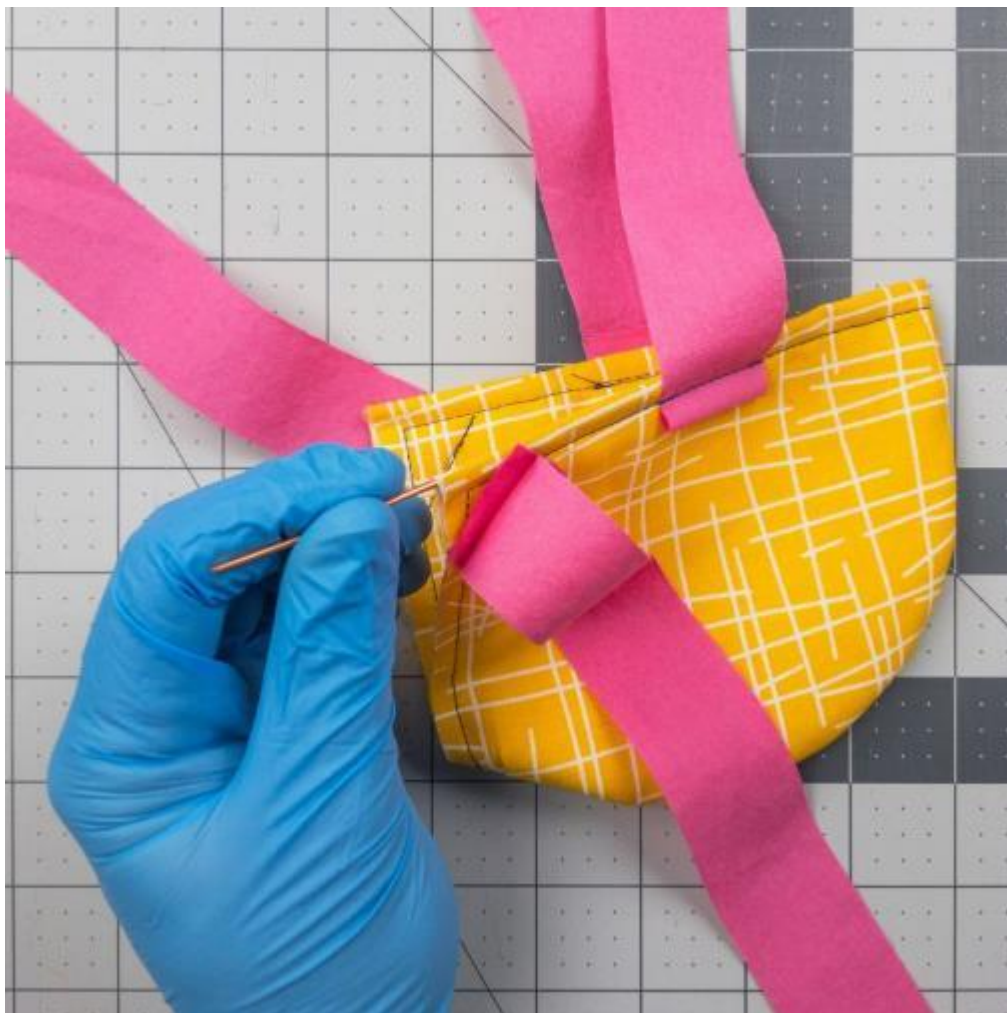

13. Вкарайте телта и центрирайте върху носа.

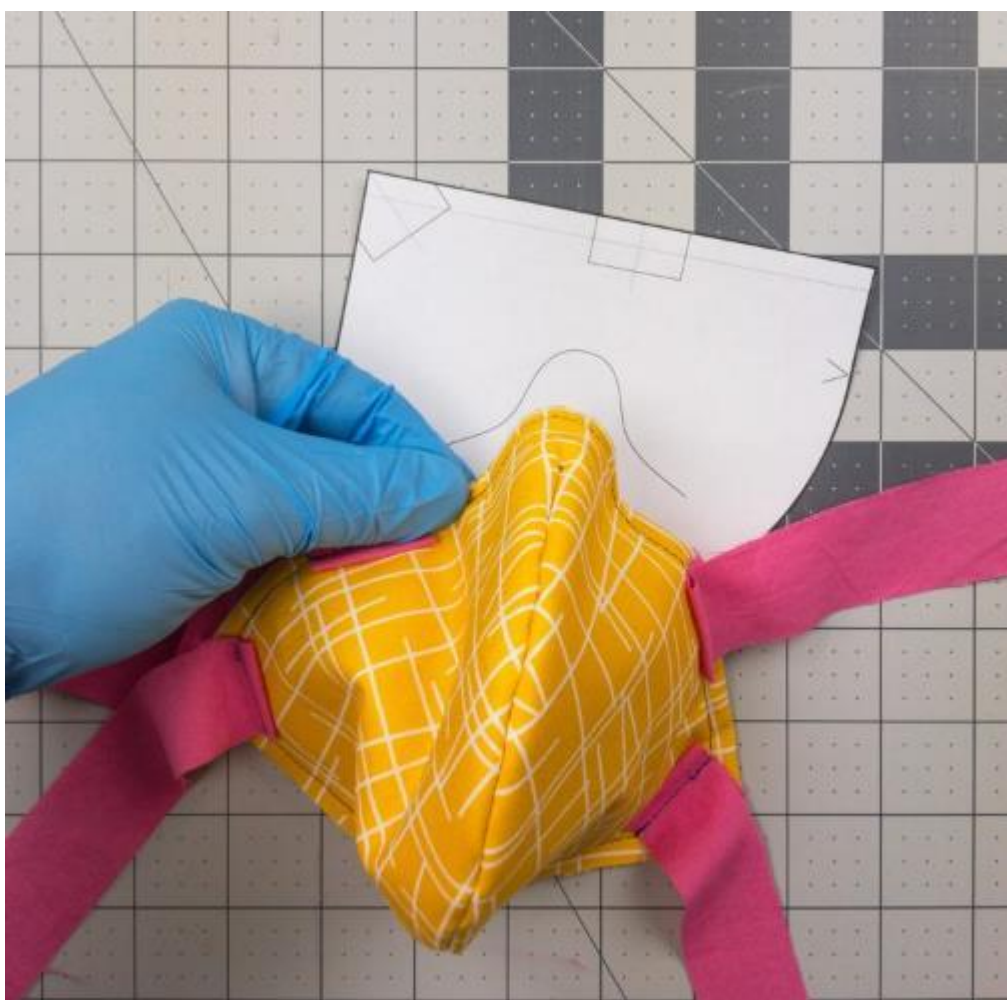

14. Извийте телта в приблизителната форма на носа.

Носете

ragmask.com



Предстоят инструкции за грижа и поддръжка...

Идея: Бързи връзки

Още идеи на ragmask.com/pro



1. Отпечатайте още едно копие на страница 1, Изрежете шаблона. След първото сгъване, отбележете местата на връзките.



2. Зашийте връзките като част от първия шев. (Минете по два пъти върху връзките за допълнителна здравина).



3. Сгънете на две (връзките от вътрешната страна), отбележете, зашийте и изрежете както преди.